



DERMIDA

ПИСАЛКА МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА



/ СЪДЪРЖАНИЕ .

1. Въведение и информация за това ръководство	4	6. Системна терапия [MatriXneedling®].	20
2. Важни инструкции за безопасност	6	6.1 Глава на иглата и нива на скорост	22
2.2. Инструкции за безопасност, специфични за продукта	6	6.2 Области на приложение	23
2.3. Важни предпазни мерки за защита на здравето и безопасност	7	6.3 Избор на продукт за третиране на лицето	32
2.4 Противопоказания и странични ефекти	8	6.4 Избор на продукт за лечение на тялото	38
2.4.1 Противопоказания за микронидлинг и микродермабразия	8	6.5 Избор на продукти специални области на приложение	42
2.5 Изискване за квалификация на потребителя	9	6.6 Инструкции с тъпка по тъпка	44
2.6 Употреба по предназначение, приложение		7. Почистване и поддръжка	46
2.6.1 Употреба по предназначение	9	7.1 Инспекция	46
2.6.2 Обхват	9	7.2 Съвместими материали	46
2.6.3 Правилна употреба	10	7.3 Дезинфекция на повърхностите	47
2.7 Символи върху продукта	10	7.4 Почистване и дезинфекция на устройството	47
3. Обхват на достъпката	11	8. Условия за транспорт и съхранение	48
4. Информация за устройството	11	8.1 Накрайник, зарядно устройство за батерии	48
4.1 Спецификации	11	8.2 Иглени модули	48
4.2 Условия на работа	12	9. Обучение	49
4.3 Аксесоари и резервни части	12	9.1 Медицински микронидлинг	49
5. Пускане в експлоатация и използване	13	9.2 Естетично микродермабразия	49
5.1 Безжичен режим	14	10. Гражданско задължение	49
5.2 Кабелен режим	14	11. Гаранция	50
5.3 Режим на зареждане	14	12. Условия, които не се покриват от гаранцията	50
5.4 Включване и изключване: ВКЛ. и ИЗКЛ.	15	13. Бележки за извършване на устройството	51
5.5 Настройка на честотата на стимулация и скоростта	16		
5.6 Поставете на защитния капак			
5.6.1 Накрайник и кабел	17		
5.7 Поставете или подмяна на модулите навън	17		
5.8 Регистриране на дълбочината на иглата	18		

1. ВЪВЕ ДЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО.

/ УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Благодарим Ви, че закупихте DERMIDA® MEDICAL CONTROL и за доверието,
което ни гласувате.

Закупеното от вас устройство ви позволява да работите в два режима: в безжичен
режим благодарение на вградената литиева батерия или в режим на захранване с
кабел.

MEDICAL CONTROL може да бъде оборудван с различни аксесоари
(иглени патрони) с е използват за извършване на следните лечения :

- Медицински микронидлинг
- Микродермабразия

Медицинският микронидлинг се извършва с помощта на наконечника, към
който е прикрепен стерилен иглен модул за еднократна употреба. Този иглен
модул се състои от малки, заострени апликатори (максимална дължина 2,5 mm),
които причиняват микроперфорация на кожата и чрез стимулиране на епидермиса
и дерматосигуряват силно механично обновяване на кожата (индукиция на
колаген). След това кожата изглежда по-сияйна и стегната.

Микродермабразията се извършва с помощта на накрайника, към който е
прикрепен стерилен патрон за еднократна употреба. Състои се от 130 малки,
заострени микроапликатора (максимална дължина 0,1 mm), които създават хомогенен
пилинг ефект, за да стимулират обновяването на кожата и дълбоко почистване,
премавяйки мъртвите кожни клетки.

ВНИМАНИЕ !

Правилният процес на обработка и нейното приложение са гарантирани само при използване на
сертифицирани оригинални принадлежности.

Не използвайте неспецифични и непроверени продукти (кремове, емулсии,
гелове, серуми, пигменти), тъй като те могат да причинят странични ефекти и/или повреда
на аксесоара.

ВЪВЕ ДЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Тези инструкции за работа се отнасят за техните набори от функции на
NeedlingPen MEDICAL CONTROL и неговите специфични принадлежности. Той
съдържа важна информация за безопасен монтаж, безопасна работа и грижа за уреда и
за неговото предназначение. Това ръководство е ограничено до цялата информация,
която е от съществено значение за безопасното използване на устройството.

2.1 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно изцяло тези инструкции за експлоатация.
- Товароводството е едно за всички лица, които използват.
Използвайте, почиствайте, дезинфекцирайте и съхранявайте NeedlingPen MEDICAL CONTROL или транспортирайте, съхранявайте надолуно място.
- Предлагайте тези инструкции за работа с всяко лице, което ще използва NeedlingPen MEDICAL CONTROL.
- Спазвайте правилата за безопасност. Поддържайте работното място чистотата и хигиенно.
- Използвайте NeedlingPen MEDICAL CONTROL само ако устроят е в добро състояние.
- Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части.

2.2 СПЕЦИФИЧНИ БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРОДУКТА

- Никогане модифицирайте аксесоарите на , иглените модули или нещо друго NeedlingPen MEDICAL CONTROL.
- Не използвайте 220V AC захранване, тъй като може да причини пожар или неизправност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани и не им е позволено да използват убождането Play Pen MEDICAL CONTROL.
- Уверете се, че течности не попадат в наконечника или захранването проникване.
- Избягвайте източници на налягане, като сте близо до NeedlingPen MEDICAL CONTROL не се използват мобилни устройства.
- Накрайникът по време на употреба от капка на накрайника защита.
- Ако NeedlingPen MEDICAL CONTROL не се използва или напълно зареден, изключете го от захранването и го съхранявайте в държача на накрайника, за да предотвратите търкаляне или падане на устроя.
- Техническите данни, дадени в товароводството, спазвайте и спазвайте условията за експлоатация, трансपोर्ट и съхранение.
- Писалката NeedlingPen MEDICAL CONTROL за проверка на изпратената гонимост, ако е повреден, ако не работи нормално или ако устроят е повреден или накрайникът е попаднал течност.
- Препоръчваме да използвате NeedlingPen MEDICAL CONTROL като правило да се изпраща на оторизиран дилър за проверка на умерени интервали от 24 месеца.

3. ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Микродермабразията изисква специални предпазни мерки за здраве и безопасност, които са включени в списъка. Медицинската микронидлинг изисква специални предпазни мерки за здраве и безопасност, както е посочено в списъка, и трябва да се извършва само от подготвен обучен специалист, в съответствие с разпоредбите и законите, които са в сила в различните страни.

- Следвайте всички стъпки за дезинфекция на устроя преди третиране.
- Носете нитрилни или латексови ръкавици и заеднократна употреба, предпазна маска за очите и ушните, шапка и халат заеднократна употреба преди началото на лечението и по време на всички операции.
- Кожната област на пациента преди лечението с почистващ препарат и дезинфектант. Можете да постигнете идеални резултати с процедурата на третиране с матрична система за игла.
- Използвайте само локални и стерилни препарати за лечение този тип приложения с асептични.
- Използвайте нов модул на игла в стерилна опаковка за всеки клиент. Преди лечение проверете дали опаковката не е повредена и рокът на годност не е изтекъл. Номерът на партидата на използваните иглени модули запишете с убожената клиентска карта, за да избегнете проблеми да докладват производителите.
- Иглените модули са стерилни продукти заеднократна употреба (консумативи) и може да се използва само веднъж.
- Използваните или дефектни касети и тяхната опаковка е повреден, в специален контейнер с поред разпоредбите във вашата страна изхвърлете в съответствие с приложените разпоредби.
- Уверете се, че иглените модули никогане са в контакт със замърсени предмети, като напр. Б. облеклото влизав контакт. Замърсените иглени модули не трябва да се използват и трябва да се изхвърлят незабавно.

- По време на употреба накрайникът трябва да бъде напълно покрит с асептична защитна фолио. Накрайникът трябва да бъде преди поставяне на иглените модули с асептична защитна филм.
- Периодично накрайника за видимо замърсяване проверка.
- Винаги дръжте накрайника здраво, преди да го включите или поставите на рафта. Ако незакрепен накрайник е включен, той може да се движи поради вибрации и да причини нараняване.

- Не забравяйте да посочите на клиента, че контактите да се избягва при пряк контакт с третирана кожа. Пряк контакт с третираните участък и от кожата трябва да бъдат защитени от замърсяване и UV радиация.
- Други дразнещи ситуации като посещението на басейна, сауна, аблативен или химически пилинг и депилация на третираните. Петната трябва да се избягват през първите два до три дни с лечение.

2.4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Аколицето, отговорно за лечението, има и най-малкото съмнение, че безопасността на лечуването пациент не е гарантирана, напр. Б. поради заболяване или вторични състояния, лечението трябва да бъде прекъснато или с пряко незабавно.

2.4.1 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА MICRONEEDLING AND

МИКРОДЕРМАБРАЗИО:

- Лица, страдащи от алергии, епилепсия, инфекции или аутоимунни заболявания, заболявания, инфекции на дишателните пътища, сърдечно-съдовата система или кожата, която ще се третира.
- Болни или лекувани с лекарства, които променят нормалната повторна епителизация на кожата (напр. диабет, с редиземноморска анемия и др.) или които са подложени на химиотерапия.
- Всяка форма на активно акне в третираната зона.
- Ако лечението се комбинира с друга естетика, медицински лечение, които компрометират дебелината и цялостта на епидермиса.
- Отворени рани, екзема или обриви в областта, която ще се третира.
- Залечение на хронични видими отоци и синини по областта.
- Системни инфекции и вирусни заболявания (напр. хепатит А, В, С, D, Е или F, HIV инфекция) или остри локални кожни инфекции (напр. херпес, розацея).
- По време на химиотерапия, лъчетерапия или високи дози кортикостероидна терапия.
- Бременност и кърмене.
- Лица под 18 години без съгласието на родител или настойник.

2.4.2 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

В някои случаи могат да се появят леки странични ефекти по време и след лечението. Тези нежелани реакции са изброени по-долу.

- Дискомфорт в първия ден от лечението • Кожно дразнене (като сърбеж или чувство на горешина в третираната зона), което обикновено се появява в рамките на първите 12 до 72 часа след лечението и изчезва.
- Леко, временно излизане на кожата, което обикновено преминава в рамките на осем дни.

2.5 НЕОБХОДИМИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КВАЛИФИКАЦИИ

NeedlingPen MEDICAL CONTROL и неговите аксесори не могат да се използват от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или от деца. Устройството и неговите аксесори не трябва да се използват от лица без опит или познания, освен ако не са под наблюдение или инструктирани.

NeedlingPen MEDICAL CONTROL може да се използва само от персонал, който отговаря на следните изисквания:

- Подходящо обучение от производителя или неговия дистрибутор или друг компетентен орган, както по отношение на аспектите на безопасността (както е посочено в инструкциите за употреба), така и по отношение на техническите, хигиенните и естетическите аспекти на обработките.
- Основни познания за медицински микронидлинг и микродермабразия • Познаване на правилата за хигиена и безопасност • Познаване на рисковете и страничните ефекти

2.6 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

2.6.1 УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

NeedlingPen MEDICAL CONTROL ви позволява да работите с различни аксесори (патрони за игли) за извършване на следните лечения:

- За медицински микроигли: Стерилният иглен модул за еднократна употреба, състоящ се от заострени апликатори (максимална дължина 2,5 mm), беше специално за медицинско лечение на здрава кожа с цел разработен за подмладяване на кожата. С микроигли се стимулират повърхностните слоеве на кожата и по време на механичния процес могат да възникнат микролезии. След това кожата има нужда от почивка, в която да обмени клетки и да се регенерира.
- За микродермабразия: специални стерилни игли за еднократна употреба с специални, заострени микроапликатори (максимална дължина 0,1 mm), които създават хомогенен пилинг ефект на стимулирано обновяване и дълбоко почистване на кожата и премахване на мъртвите кожни клетки.

2.6.2 ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения за медицински микронидлинг:

- Третиране на линии/бръчки за подмладяване на кожата • Физиологично подобряване на кожната активност чрез стимулираща епидермиса
- Третиране на белези, белези от акне и стрии
- Хиперпигментация

Приложения за микродермабразия:

- Лечение за естетична корекция на лицеви несъвършенства и върху тялото

2.6.3 ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

Всички лечения, извършвани с NeedlingPen MEDICAL CONTROL (медицински микроигли и микродермабразия), трябва да се извършват в сухо, чисто помещение без дим при перфектних иглени условия. NeedlingPen MEDICAL CONTROL трябва да се поддържа, използва и поддържа, както е описано в тези инструкции за работа. Поспециално трябва да бъдат изпълнени приложимите изисквания за проектиране на работните места и използваните материали.

Правилната употреба също означава, че това ръководство, специално раздел „2.2 Спецификации за продукта инструкции за безопасност“, е прочетено и разбрано изцяло.

Правилната употреба изисква само с ледните групи пациенти:
• Здрави възрастни мъже и жени

Неправилна употреба възниква, когато NeedlingPen MEDICAL CONTROL или неговите аксесоари се използват по начин, различен от описания в тези инструкции за работа, или когато условията на работа не са спазени. Лечението е забранено, освено в случай на противопоказания (вижте параграф "2.4 Противопоказания").

2.7 СИМВОЛИ ВЪРХУ ПРОДУКТА

Символите, описани по-долу, могат да бъдат намерени в тези инструкции за работа, върху NeedlingPen MEDICAL CONTROL и нейните принадлежности или върху опаковката.

СИМВОЛИ	ЗНАЧЕНИЕ
	опасност!
	Писалката NeedlingPen MEDICAL CONTROL отговаря на Директиви 2006/42/ЕО и 2004/108/ЕО
	Корпусът предлага защита срещу груб прах и водна капка
	Калъфът осигурява защита срещу капки вода

3. ОБЕМ НА ДОСТАВКАТА.

ОБХВАТ НА ДОСТАВКА

- 1х наконечник
 - 1х кабел за накрайника
 - 1х зарядно устройство за батерии
 - 1х тава за наконечник
 - 1х ръководство за употреба и поддръжка
 - 2х иглени модула
- Защитните капаци и накрайника, необходими за леченията, не са включени в обхвата на доставката. Подходящите аксесоари за накрайника могат да бъдат закупени от авторизирани търговци или нашия онлайн магазин, вижте "4.3 Аксесоари и резервни части".

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО.

4.1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

устройство	Писалката игли MEDICAL CONTROL
номинално напрежение	5VDC
консумация на енергия	1.5W
модел батерия	Код на модела: 13/00294-00
клас на защита	2
честотно колебание	Скорост 1: 108 импулса/сек Скорост 2: 111 импулса/сек Скорост 3: 115 импулса/сек Скорост 4: 119 импулса/сек Скорост 5: 121 импулса/сек Скорост 6: 126 импулса/сек
двигател	DC прецизен двигател
режим на работа	Безжичен
Размер на продукта (ДхШхВ)	185 mm x 170 mm x 72 mm
Тегло на наконечника	80g
общо тегло	600g

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО.

4.2 УСЛОВИЯ НА РАБОТА

устройство	Писалка за игли MEDICAL CONTROL
работна температура	+15 °C до +25 °C
влажност	30% до 75%
влажностна г.г.г.	700hPa до 1070hPa

4.3 АКСЕСОРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Следните аксесоари и резервни части могат да бъдат получени само от авторизирани дилъри.

Аксесоари	Описание на статията	количество
Иглени модули за микродермабразия	130AN	1 брой в стерилни опаковки
Иглени модули за медицински микронидлинг	9MN 0,18	1 брой в стерилни опаковки

резервна част	описание	съдържание	количество
Накрайник NeedlingPen МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ	писалка за игла МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ	1	1
литиева батерия	-	1	1
Кабел накрайника	-	1	1
цетисел	13/00294-00	1	1
ръководство за експлоатация	-	1	1

5. ПУСКАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

NeedlingPen MEDICAL CONTROL може да работи в два различни режима: в безжичен режим без кабел и в режим със свързан зарядващ кабел за променлив ток.

БАТЕРИЯ.

Акумулаторна батерия

РЕКЛАМА.

Включване / показване на скоростта

БУТОН.

Бутон за включване / скорост

ДВОЕНАЩАБ.

Двойна скала за настройка на работата (PD/DS система)

ИГЛЕНИ МОДУЛИ.



5. ПУСКАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

5.1 БЕЗЖИЧЕН РЕЖИМ МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ НА NEEDLINGPEN

Устройството работи на външна батерия, без кабелна връзка.

5.2 КАБЕЛЕН РЕЖИМ ПИСАЛКА МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ

Устройството се зарежда от електрическата мрежа чрез свързване към електрически контакт с кабел.

1. Свържете зареждащия блок с щепсела.
2. Свържете зареждащия адаптер към електрическия контакт.
3. Заредете батерията. Включете АС адаптера в електрически контакт и свържете към изхода на зареждането.

5.3 РЕЖИМ НА ЗАРЕЖДАНЕ



ЗАРЕДТЕ (ЧЕРВЕНО).

По време на зареждане индикаторът за зареждане свети в червено.

ЗАРЕДНО (ЗЕЛЕНО).

Когато зареждането приключи, индикаторът за зареждане светне в зелено.

5.4 ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ : ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

ВНИМАНИЕ !

Ако накрайникът не се държи здраво, когато е включен, той може да се движи неконтролируемо поради вибрации.

- Дръжте накрайника здраво, преди да го включите.



ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ .

Включване и изключване на Писалката МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ

Напистете и задръжте бутона за зареждане за 2-3 секунди, за да включите или изключите устройството.

ВНИМАНИЕ !

Когато използвате MEDICAL CONTROL NeedlingPen в режим с кабел, внимавайте да не се счупите в кабела. Неправилно поставеният кабел може да предствлява опасност от счупване.

- Уверете се, че всички кабели са прекатрани така, че никой да не се счупва в хилите може да дръпне неволно.

ВНИМАНИЕ !

Опасност от повреда на писалката MEDICAL CONTROL. Неподходящите аксесоари и резервни части могат да нарушат работата и безопасността на писалката MEDICAL CONTROL. NeedlingPen MEDICAL CONTROL може да бъде повредена, неизправна или неизправна.

- Само иглените модули, изброени в глава "4.3 Аксесоари и резервни части" на страница 12, Използвайте аксесоари и резервни части.

5. ПУСКАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

5.5 НАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТА И СКОРОСТ НА СТИМУЛАЦИЯ

Когато NeedlingPen MEDICAL CONTROL е в режим на работа, честотата на стимулация може да се променя или регулира чрез кратко натискане на бутона за включване. Устройството може да работи на общ шест различни скорости. Наконечникът започва с ниска скорост и преминава към висoka скорост.



ДИСПЛЕЙ ЗА СКОРОСТ.

Скоростта по подразбиране е 108 стимулации в секунда. Контролният блок автоматично се нулира към тази настройка по подразбиране при всяко включване. NeedlingPen MEDICAL CONTROL има честотен диапазон от 108 - 126 (1-6 нива на скорост) трептения в секунда и може да се регулира на шест нива.

ВНИМАНИЕ !

Повреда от кондензация : Ако NeedlingPen MEDICAL CONTROL е изложена на големи температурни колебания , например по време на транспортиране, кондензацията може да се събере вътре и да повреди електронните компоненти.

- Уверете се, че NeedlingPen MEDICAL CONTROL е достигнал съответната температура преди употреба. Ако NeedlingPen MEDICAL CONTROL е бил изложен на температурни колебания , поне 3 часа на 10 °C преди да го използвате

изчакайте температурната разлика.

- Писалката NeedlingPen MEDICAL CONTROL също при съответната температура между +15 °C и +25 °C.

ВНИМАНИЕ !

Намалена функционалност поради електромагнитни смущения .

Преносими и мобилни HF комуникационни устройства : Устройства като мобилни телефони или WLAN рутери могат да повлияят на работата на NeedlingPen MEDICAL CONTROL чрез излъчване на електромагнитно излъчване. Безопасната работа на NeedlingPen MEDICAL CONTROL вече не е гарантирана.

- Избягвайте източници на смущения , като се уверите, че няма преносими или мобилни устройства в близост до NeedlingPen MEDICAL CONTROL.
- Обучете пациентите за риска от източници на смущения .


5.6 ПРИКРИВАНЕ НА ПРЕДПАЗНА КАПАК КЪМ НАКОНЕЧНИК И КАБЕЛ

За да предпазите наконечника и неговия кабел от замърсяване по време на лечението, препоръчваме да поставите капак за кабел за еднократна употреба с диаметър 20-27 mm към наконечника.

5.7 ПОСТАВЯНЕ ИЛИ ПОДМЯНА НА ИГЛЕНИТЕ МОДУЛИ

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ИГЛЕНИТЕ МОДУЛИ ЗА МИКРОНИДЛИНГ И МИКРОДЕРМАБРАЗИО

- Само оригинални иглени модули за микронидлинг и микродермабразия употреба, които са подходящи за предходно посочения наконечник.
- Изключете наконечника, преди да смените иглените модули.
- Извършете правилно използвания модул на иглата, който вече не е необходим за текущо лечение.
- Иглени модули се доставят в стерилна опаковка. Точно преди това премахнете употребата от стерилна опаковка.
- Винаги поставяйте наконечника върху държача на наконечника, така че модулет на иглата да не лежи на повърхността.
- Изключете наконечника.
- Хванете ос новата патрона, за да го поставите в наконечника.

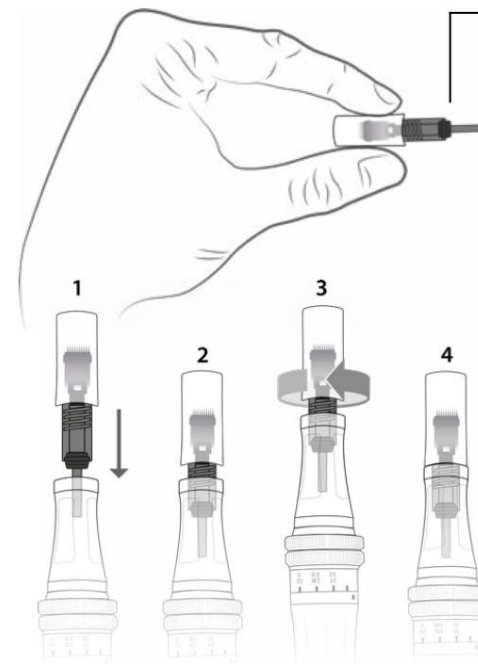

ИЗВЕСТИЕ .

Как да хванете патрона с иглата.

- Модулет на иглата в края на конектора на наконечника. Игленият модул може да се използва във всички възможни ориентации.

- Завертете патрона с иглата по посока на часовниковата стрелка, докато почувствате съпротивление. Модулет на иглата вече е на място и здраво в наконечника.

- Проверете дали модулет на иглата е правилно позициониран.

- За да премахнете модула на иглата, завъртете патрона с иглата обратно на часовниковата стрелка и навън от наконечника предпазливо.

5. ПУСКАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ .

5.8 РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ИГЛАТА

ВНИМАНИЕ !

- Степента на изпъкналост (дължина на иглата) в зависимост от лечението (медицинско микронидлинг или микродермabrasio), индикацията и съответния режим на иглата.
- Степента на изпъкналост в зависимост от характеристиките на кожата на клиента. Изберете клиента и зоната за третиране.

За по-добър визуален контрол е препоръчително да регулирате степента на изпъкналост при включен накрайник.

Тялото на наконечника е оборудвано с патентована система за двойна насройка на технологията PD/DS, Performance Deep / Double System, която показва зададената степен на изпъкналост.


Тази система за насройка позволява на оператора да работи прецизно, тъй като той винаги знае колко точно с твърди модули на иглата за всички видове третиране (микроидлинг, микрообуждания и микродермabrasio).

- Включете накрайника.
- Степента на изпъкналост чрез завъртане на подвижната част на регулирате накрайника. Когато използвате скалата като водан, завъртете, докато маркировката застане в желаната позиция. През завъртането по посока на часовниковата стрелка (когато гледате патрона) увеличава степента на изпъкналост.

ИЗВЕСТИЕ .

Как да регулирате степента на изпъкналост.

MN MICRODERMABRASION

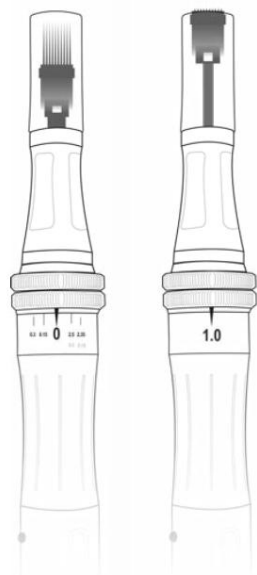

DERMIDA

[MATRIXNEEDLING®]

СИСТЕМАТЕРАПИЯ



/ СИСТЕМОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОБЛЕМНИТЕ ЗОНИ.

За да провеждате систематично лечение с микронидлинг, вие освен апарата се нуждате и от стерилни серуми и продукти за грижа. Специално координираните активни съставки ви позволяват да извлечете най-доброто от лечението.

8 СЪПКИ ЗА ПЕРФЕКТИВЕН РЕЗУЛТАТ:



ПОЧИСТВАНЕ

Преди микронидлинг кожата трябва да бъде старателно, но все пак много нежно, отстранена от мъртвите кожни клетки, себума, грима и кожните замърсявания. В същото време кожната бариера и естествена защитна функция на кожата могат да бъдат подсилени с вискозозни почистващи препарати. Ние предлагаме Treatment Purifying Cleanser (базова серия) за чувствителна, нормална и с мисена кожа и Treatment Purifying Cleanser за мазна кожа, склонна към акне.

Активни съставки: керамида, екстракт от бамбук, алантоин, хамелис, витамин Е



ПИЛИНГ


След ос новното почистване кожата е оптимално подготвена за третиране с ензимен пилинг. Това не само отстранява мъртвите кожни клетки, но и поставя курс за бързо обновяване на кожата с лед процедура. Използваме капсулирани ензими от папая и бромелаин в нашия ензимен пилинг, тъй като и двете активни съставки са едновременно нежни.

Активни съставки: екстракт от папая, бромелаин, манитол, витамин Е



СЕРУМ

Като цяло имате две възможности за комбиниране на прилагането на микронидлинг с терапия с активно вещество (серум). Или работите със стерилизиран серум директно с алката за игли, или използвате серум за последваща грижа след лечението. Поради фармацевтичната чистота и повисоката ефективност препоръчваме използването на стерилна ампула с активна съставка. С 13 стерилни мезосерума, ние предлагаме уникално разнообразие, с което можете да третирате специфични естетични дефекти. За интензивна хидратация честотите препоръчват първоначално третиране с Hyaluron Booster. Съставът на активните съставки варира значително във всяка област на приложение.

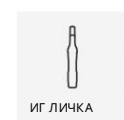

ИГЛИЧКА


Ние сме пионерите в микронидлинг и колаген индуционната терапия в Германия. При пробождане с електрическа алкаглата на иглата се движи нагоре и надолу, което води до 18 000 удара в минута с усройства с висока производителност. По време на това движение нагоре и надолу алката за игла се насочва по кожата, оставяйки малки вертикални канали за пробиване в повърхността на кожата, така наречената перфорация. Този процес задейства серия от биологични процеси, които помагат на кожата да се „ремонтира“ и обнови. Голям брой кожни проблеми могат да бъдат лекувани ефективно по този начин. Целта е 200 до 250 убождания на см² за оптимален резултат.



ХИДРАТАЦИЯ

Нашите уникални хидратиращи маски се предлагат както за процедури за лице, така и за тяло. Те осигуряват интензивна хидратация на кожата, подпомагат процеса на регенерация на кожата и стимулират производството на естествен еластин и колаген в организма. Зачервяването, раздразнението, микроразкъсванията и сухотата намаляват незабавно. С тази мощна маска гарантирано няма да се нуждаете повече от серум след лечението.


Активни съставки: Matrixyl®, Niacinamide, Hyaluronic Acid, Gatuline Expression AF, iActive-Complex, ProdeW 500, Вода от олуци

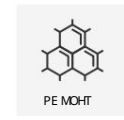

РЕМОНТ

След лечението е необходима незабавна първа помощ. Нашият възстановяващ балсам след третиране осигурява точно това. Кремът укрепва отслабената кожна бариера и възстановява баланса на кожата. Освен това регулира pH на кожата. Интензивно грижовен, ремонтнаращи радиен. За по-добро използване кремът е хигиенично опакован в индивидуални сашета.

Активни съставки: Bifida Ferment Lysate, Allantoin, Urea, Hyaluron

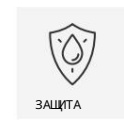

ЗАЩИТА

Можете да защитите добре кожата си след третирането с личното си поведение. За външни влияния като UV радиация имайте нашия UV Protect Cream SPF50+. Това е UV-защитен, възстановяващ тънък и много бързо погиващ лънцезащитен крем с висок лънцезащитен фактор 80. Базиран е на доказани UVB и UVA филтри, както и подхранващи съставки за стабилизиране на кожата.

Активни съставки: Ензими за възстановяване на ДНК, протеини, екстракт от планктон



ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА

Получете повече от вашето лечение. С дневни кремове, специално съобразени с целта на вашето лечение, можете оптимално да допълните лечението. Предлагаме лечебни дневни кремове против стареене, целулит, пигментни петна, белези или мазна кожа. За да направите това, използвайте крема като дневна грижа през всички дни между процедурите. Съставът на активните съставки варира значително във всяка област на приложение.



Използвайте само оригинални аксесоари DERMIDA® за съответния уред. Иглените глави на писалката за игли X-tra CONTROL или SMART CONTROL не пасват на MEDICAL CONTROL и обратно, тъй като имат различни технологии на заключване.

Изброяните тук комбинации са само ориентировъчни стойности. Действително използваните настройки може да варират в зависимост от предпочитанията на практикуващия или типа кожа.

дълбочина на иг лага	с К о р о с Т
0,2 мм-0,5 мм	1 до 2
0,5 мм - 1,0 мм	2 до 3
1,0 мм - 1,5 мм	3 до 4
1,5 мм - 1,0 мм	4 до 5
2,0 мм - 2,5 мм	5 до 6

No DA130058-2	Нано Безболезнено достъпване на активни съставки без претъпяване, UVB защита, общ обновен външен вид на кожата, нано пилинг, микро-регенерация
No DA130055-2	9s Белези, белези от акне, стрии, целулит, локални мастни натрупвания, дълбоки бръчки, мелезми, бръчки, груби пори, хиперпигментация, обезцветяване на кожата

D E R M I D A

[MATRIXNEEDLING®]
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



области на приложение	тънка кожа	дебела кожа	с корост	с ерум	бележки
 брънки по челото	0,25 мм-0,5 мм	0,5 мм - 0,75 мм	1 - 3	 Аргирелин + Пептидни бустери *	
 набръщане на линия	0,25 мм-0,5 мм	0,5 мм - 1,0 мм	1 - 3	 Аргирелин + Пептидни бустери *	
 зона около очите (пани и крак, брънки под очите, торбички под очите)	0,25 мм	0,25 мм-0,5 мм	1	 Обръщане на околоочния контур	
 нос а и моста на носа	0,25 мм	0,5 мм	1 - 3	 Хиалуронов бустер	
 прегъват окцид с кули	0,5 мм	0,5 мм - 1,0 мм	1 - 3	 Интензивен анти-стареене *	

области на приложение	тънка кожа	дебела кожа	с корост	с ерум	бележки
 частта за устата (губи на устата, марионетки и наволабиални гънки)	0,5 мм - 1,0 мм	1,0 мм - 1,5 мм	2 - 4	 Аргирелин + Пептидни бустери *	
 хиперпигментация и възрастни петна	0,5 мм - 0,75 мм	0,75 мм - 1,0 мм	2 - 3	 Несвършенство в цвѣта на кожата контрол	
 белези и белези от акне	1,0 мм - 1,25 мм	1,5 мм - 2,0 мм	3 - 5	 Разтягане и възстановяване на белези	
 Големи пори	0,5 мм	0,5 мм	2	 Ретинол + витамин С бустер	
 Силни брънки (Общ)	0,75 мм - 1,0 мм	1,0 мм	3 - 4	 Интензивен анти-стареене *	

области на приложение	тънка кожа	дебела кожа	с корост	с ерум	бележки
 растягане и стрии	1,5 мм	1,5 мм	4 - 5	 Растягане и външна ванна на белези	
 белег	0,75 мм - 1,5 мм	0,75 мм - 1,5 мм	3 - 5	 Растягане и външна ванна на белези	
 пигментни петна	0,5 мм - 0,75 мм	0,75 мм - 1,0 мм	2 - 3	 Несвършенство в цвѣта на кожата контрол	
 целулит	1,0 мм - 1,5 мм	1,0 мм - 1,5 мм	3 - 5	 общи на целулита	
 Местни масни подложки	1,0 мм - 1,5 мм	1,0 мм - 1,5 мм	3 - 5	 Усилвател на липолизата	

области на приложение	тънка кожа	дебела кожа	с корост	с ерум	бележки
 рас тежна кос ата	0,25 мм-0,5 мм	0,25 мм - 0,75 мм	1 - 3	 Ус корители на рас тежна кос ата	
 устни	0,25 мм-0,5 мм	0,25 мм-0,5 мм	12	 бустер за устни	
 мазна кожа	0,25 мм - 1,0 мм	0,25 мм - 1,0 мм	1 - 3	 Въз танова ване на акне и мазна кожа	
 ВВ бля с ък	0,25 мм-0,4 мм	0,25 мм-0,4 мм	12	 DM Cell Brightening Foundation*	

ПОДНОВЯВАНЕ НА КОЖАТА И ПРЕДОТВРАЩАВАНЕ НА БРЪЧКИ

							
ПОЧИСТВАНЕ лечение почистава с ред-тво	ПИЛИНГ ензимен Лечебен скраб	СЕРУМ EGF клетъчен бустер	ИГ ЛИЧКА Иглогичка 0,25 mm	Х ИДРАТАЦИЯ Хидратиращ мас за лице	РЕМОНТ след лечение Възстановяващ крем	ЗАЩИТА UV защита Крем SPF 50+	ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА Ежедневна грижа за лечението Основни серии
No DA161206	No DA143732	No DA155601-1	No DA300165	No DA143722-1	No DA141852	No DA113200	No DA143727

ЛЕКИ ДОСРЕДНИ БРЪЧКИ

							
ПОЧИСТВАНЕ лечение почистава с ред-тво	ПИЛИНГ ензимен Лечебен скраб	СЕРУМ Хиалуронов бустер	ИГ ЛИЧКА Иглогичка 0,5 mm	Х ИДРАТАЦИЯ Хидратиращ мас за лице	РЕМОНТ след лечение Възстановяващ крем	ЗАЩИТА UV защита Крем SPF 50+	ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА Ежедневна грижа за лечението Основни серии
No DA161206	No DA143732	No DA180051-3	No DA300165	No DA143722-1	No DA141852	No DA113200	No DA143727

ДЪЛБОКИ БРЪЧКИ

							
ПОЧИСТВАНЕ лечение почистава с ред-тво	ПИЛИНГ ензимен Лечебен скраб	СЕРУМ Интензивен анти-стареене*	ИГ ЛИЧКА Писалка 0,75 mm - 1,0 mm	Х ИДРАТАЦИЯ Хидратиращ мас за лице	РЕМОНТ след лечение Възстановяващ крем	ЗАЩИТА UV защита Крем SPF 50+	ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА Ежедневна грижа за лечението Основни серии
No DA161206	No DA143732	No DA155613-1	No DA300165	No DA143722-1	No DA141852	No DA113200	No DA143727

* Препоръчително третиране при неабх. одимост за интензивна хидратация
извършвайте с Hyaluron Booster.

БРЪЧКИ НА ЧЕ ЛОТО

							
ПОЧИСТВАНЕ лечения почис тващ с ред е тво	ПИЛИНГ ензимен Лечебен с краб	СЕРУМ Арг ирелин + пептиди Бустер*	ИГ ЛИЧКА Иг логис ец 0,75 мм	Х ИДРАТАЦ ИЯ Х идратиращ мас ка за лиц е	РЕ МОНТ след лечение Вас тановя вацблс ам	ЗАЩИТА UV защита Крем SPF 50+	Е ЖЕ ДНЕ ВНА Г РИХА Ежедневна г риха за лечениято Ос новни с ерии
No DA161206	No DA143732	No DA155614-1	No DA300165	No DA143722-1	No DA141852	No DA113200	No DA143727

ПЕ РИОРАЛНИ ЛИНИИ (ЪГ ЪЛ НА У С ТА ТА, МАРИОНЕ ТКА И НАЗОЛАБИАЛНИ ЛИНИИ)

	Не с е препоръчва пилинг .						
ПОЧИСТВАНЕ лечения почис тващ с ред е тво		СЕРУМ Арг ирелин + пептиди Бустер*	ИГ ЛИЧКА Иг логис ец 1.0 мм	Х ИДРАТАЦ ИЯ Х идратиращ мас ка за лиц е	РЕ МОНТ след лечение Вас тановя вацблс ам	ЗАЩИТА UV защита Крем SPF 50+	Е ЖЕ ДНЕ ВНА Г РИХА Ежедневна г риха за лечениято Ос новни с ерии
No DA161206		No DA155614-1	No DA300165	No DA143722-1	No DA141852	No DA113200	No DA143727

ПЕ РИОРБИТАЛНИ БРЪЧКИ (БРЪЧКИ ПРЕ Д ОЧИТЕ , КРАВЕ ШКИ КРАКА И ТОРБИЧКИ)

	Не с е препоръчва пилинг .						
ПОЧИСТВАНЕ лечения почис тващ с ред е тво		СЕРУМ Околоочен контур обръщане	ИГ ЛИЧКА Иг логис ец 0,25 мм	Х ИДРАТАЦ ИЯ Х идратиращ мас ка за лиц е	РЕ МОНТ след лечение Вас тановя вацблс ам	ЗАЩИТА UV защита Крем SPF 50+	Е ЖЕ ДНЕ ВНА Г РИХА Ежедневна г риха за лечениято Ос новни с ерии
No DA161206		No DA155607-1	No DA300165	No DA143722-1	No DA141852	No DA113200	No DA143727

* Препоръчително е при неабх. одимост за интензивна хидратация извършвай те с Hyaluron Booster.

ГОЛЕМИ ПОРИ

 ПОЧИСТВАНЕ лечение почистава с редуктор No DA161206	 ПИЛИНГ ензимен Лечебен скраб No DA143732	 СЕРУМ Ретинол + витамин С бустер No DA155608-1	 ИГ ЛИЧКА Иглологичек 0,5 мм No DA300165	 Х ИДРАТАЦИЯ Хидратираща маска за лице No DA143722-1	 РЕМОНТ след лечение Възстановяващ балсам No DA141852	 ЗАЩИТА UV защита Крем SPF 50+ No DA113200	 ЕЖЕДНЕВНАГ РИЖА Ежедневнаг риж за лечението Ос новни серии No DA143727
---	--	--	---	---	--	---	--

БЕЛЕЗИ И БЕЛЕЗИ ОТ АКНЕ

 ПОЧИСТВАНЕ лечение почистава с редуктор No DA161206	 ПИЛИНГ ензимен Лечебен скраб No DA143732	 СЕРУМ Разтягане и белег обрищане No DA155605-1	 ИГ ЛИЧКА Иглологичек 1.0 мм No DA300165	 Х ИДРАТАЦИЯ Хидратираща маска за лице No DA143722-1	 РЕМОНТ след лечение Възстановяващ балсам No DA141852	 ЗАЩИТА UV защита Крем SPF 50+ No DA113200	 ЕЖЕДНЕВНАГ РИЖА Ежедневнаг риж за лечението Сериа разтягане и белези No DA143731
---	--	--	---	---	--	---	--

ПИГМЕНТИ И СТАРЕЧЕСКИ БЕЛЕГИ

 ПОЧИСТВАНЕ лечение почистава с редуктор No DA161206	 ПИЛИНГ ензимен Лечебен скраб No DA143732	 СЕРУМ цвят на кожата Контрол на несвършенствата No DA155606-1	 ИГ ЛИЧКА Иглологичек 1.0 мм No DA300165	 Х ИДРАТАЦИЯ Хидратираща маска за лице No DA143722-1	 РЕМОНТ след лечение Възстановяващ балсам No DA141852	 ЗАЩИТА UV защита Крем SPF 50+ No DA113200	 ЕЖЕДНЕВНАГ РИЖА Ежедневнаг риж за лечението Сериа тонове на кожата No DA143730
---	--	---	---	---	--	---	--

БЕЛЕЗИ, СТРИИ И БЕЛЕЗИ ОТ БРЕМЕННОСТ

							
ПОЧИСТВАНЕ лечения	ПИЛИНГ ензимен	СЕРУМ	ИГ ЛИЧКА	Х ИДРАТАЦИЯ	РЕМОНТ	ЗАЩИТА	ЕЖЕДНЕВНАГ РИЖА
почистващо с редица	Лечебен скраб	Разтягане и белег обръщане	Иглописец 1.0 мм	хидратация на тялото маска	Възстановяващ	UV защита Крем SPF 50+	Ежедневна рижка за лечение Серија за разтягане и белези
No DA161206	No DA143732	No DA155605-1	No DA300165	No DA143723-1	No DA141852	No DA113200	No DA143731

БРЪЧКИ НА ТЯЛОТО

							
ПОЧИСТВАНЕ лечения	ПИЛИНГ ензимен	СЕРУМ	ИГ ЛИЧКА	Х ИДРАТАЦИЯ	РЕМОНТ	ЗАЩИТА	ЕЖЕДНЕВНАГ РИЖА
почистващо с редица	Лечебен скраб	Ретинол + витамин С Бустер*	Иглописец 1.0 мм	хидратация на тялото маска	Възстановяващ	UV защита Крем SPF 50+	Ежедневна рижка за лечение Основни серии
No DA161206	No DA143732	No DA155608-1	No DA300165	No DA143723-1	No DA141852	No DA113200	No DA143727

ЦЕЛУЛИТ И СЛАБОСТ НА ТЪКАНИТЕ

							
ПОЧИСТВАНЕ лечения	ПИЛИНГ ензимен	СЕРУМ	ИГ ЛИЧКА	Х ИДРАТАЦИЯ	РЕМОНТ	ЗАЩИТА	ЕЖЕДНЕВНАГ РИЖА
почистващо с редица	Лечебен скраб	обръщане на целулит	Иглописец 1,5 мм	хидратация на тялото маска	Възстановяващ	UV защита Крем SPF 50+	Ежедневна рижка за лечение Целулитна серия
No DA161206	No DA143732	No DA155610-1	No DA300165	No DA143723-1	No DA141852	No DA113200	No DA143728

* Препоръчително третиране при неосложнена интензивна хидратация извършвайте с Hyaluron Booster.

ПИГМЕНТНИ И СТАРЕЧЕСКИ БЕЛЕГИ

							
ПОЧИСТВАНЕ лечения	ПИЛИНГ ензимен	СЕРУМ цвят на кожата	ИГ ЛИЧКА	Х ИДРАТАЦИЯ хидратация на тялото	РЕМОНТ след лечение	ЗАЩИТА UV защита	ЕЖЕДНЕВНАГ РИХА
Почистващ с редуктор	Лечебен с краб	Контрол на несъвършенствата	Иглописец 0,5 мм	маска	Възстановяващ бам	Крем SPF 50+	Ежедневнаг риха за лечение
No DA161206	No DA143732	No DA155606-1	No DA300165	No DA143723-1	No DA141852	No DA113200	Серия тонове на кожата
No DA143730							

МЕСТНИ МАЗНИ ПЛОЩАДКИ

							
ПОЧИСТВАНЕ лечения	ПИЛИНГ ензимен	СЕРУМ липолиза бустер	ИГ ЛИЧКА	Х ИДРАТАЦИЯ хидратация на тялото	РЕМОНТ след лечение	ЗАЩИТА UV защита	ЕЖЕДНЕВНАГ РИХА
Почистващ с редуктор	Лечебен с краб	бустер	Иглописец 1.0 мм	маска	Възстановяващ бам	Крем SPF 50+	Ежедневнаг риха за лечение
No DA161206	No DA143732	No DA155612-1	No DA300165	No DA143723-1	No DA141852	No DA113200	Целулитна серия
No DA143730							

ТОНИЗИРАНЕ

							
ПОЧИСТВАНЕ лечения	ПИЛИНГ ензимен	СЕРУМ Х халуронов бустер	ИГ ЛИЧКА	Х ИДРАТАЦИЯ хидратация на тялото	РЕМОНТ след лечение	ЗАЩИТА UV защита	ЕЖЕДНЕВНАГ РИХА
Почистващ с редуктор	Лечебен с краб		Иглописец 1.0 мм	маска	Възстановяващ бам	Крем SPF 50+	Ежедневнаг риха за лечение
No DA161206	No DA143732	No DA180051-3	No DA300165	No DA143723-1	No DA141852	No DA113200	Целулитна серия
No DA143730							

АКНЕ И МАЗНА КОЖА

 ПОЧИСТВАНЕ Лечение Почистване Почиствач с редуктор No DA143725	 ПИЛИНГ ензимен Лечебен скраб No DA143732	 СЕРУМ Акне и мазна кожа обръщане No DA155609-1	 ИГЛИЧКА гис алка за игла 0,25 mm - 1,0 mm No DA300165	 ХИДРАТАЦИЯ Хидратираща маска за лице No DA143722-1	 РЕМОНТ след лечение Възстановяващ балсам No DA141852	 ЗАЩИТА UV защита Крем SPF 50+ No DA113200	 ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА Ежедневна грижа за лечението Серия за мазна кожа No DA143729
--	--	--	---	--	--	---	--

РАСТЕЖ НА КОСА

 ПОЧИСТВАНЕ Ками шампоан за скалпа No DA180061	 ПИЛИНГ Ками скраб за скалп No DA180060	 СЕРУМ Растежна коса бустер No DA155611-1	 ИГЛИЧКА гис алка за игла 0,25 mm-0,5 mm No DA300165	 ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА Ежедневна грижа за лечението Основни серии No DA143727
---	--	--	---	--

Нашият съвет.
Използвайте растежна коса
Бустер с ерум с ледпочистване и
дезинфекция на скалпа.
Препоръчваме комбинирано третиране с 0,25
mm и 0,5 mm.
Например: понеделник
= 0,25 mm, сряда = 0,25 mm, петък = 0,5 mm.

УСТНА

 СЕРУМ бустер за устни No DA155615-1	 ИГЛИЧКА гис алка за игла 0,25 mm - 0,5 mm или нано No DA300165	 ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА грижа за устните бальсам за изпълнение No DA135129
---	--	--

ПОЛЕЗНИ АКСЕСОАРИ

ПОЛЕЗНИ АКСЕСОАРИ	АРТИКУЛ №
Лечение Чай за възстановяване на кожата	DA141722-1
Sheet mask (за индивидуални серуми)	DA141711
Alcoderm дезинфектант за кожа	DA141511
Спринцовки за фино дозиране (отстраняване на стерилни серуми)	DA180075
Четка за маска (за ензимен пилинг)	DA141891
Акрилна поставка за 24 стерилни серума	DA142087
Алуминиев държач за наконечник	DA310277

ПОДГОТОВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

Преди лечението се уверете, че имате желаните приставки за игли и всички продукти, от които се нуждаете. Поддържайте работното място хигиенично, чистото и осигурете подходящо осветление. Преди да използвате писалката, трябва да почистите добре кожата, която искате да третирате и да я дезинфекцирате с Alcoderm®.

1. ПОЧИСТВАНЕ.

Отстранете грима и почистете третираните части на тялото с обилно количество вода и мекия Treatment Cleanser. Вземете малко количество Cleanser и го смесете с малко хладка вода. Сега се създава нежна и интензивна пена за грижа. Разнесете тази пена върху частта от тялото. Масажирайте го нежно и след това го измийте обилно.

2. ЕНЗИМНО ПИЛИНГ.

Следващата стъпка е да премахнете мъртвите кожни клетки от кожата си. За целта ензимният пилинг се нанася неразреден върху кожата с четка за масажа. Не забравяйте да избягвате областта на устата и очите. Осветете действащото около 5-10 минути. След това отстранете обилно с вода и гъба, без да оставяте следи. Внимателно подсушете и напънкайте кожите участък и неразредени с дезинфектанта за кожа Alcoderm® (време на престой 30 секунди).

Забележка: При дължина на игла 0,75 mm може да е препоръчително да използвате анестетичен крем с ледова (напр. крем Emla). Моля, обърнете внимание на времето на експозиция на производителя.

3. СЕРУМ

Като цяло имате две възможности за комбиниране на приложението с микронидлинг терапия с активна съставка (серум). Работете със стерилизирано директно с писалката за игли или използвайте серум за последваща грижа след лечението. Поради фармакокинетичната честота и повисоката ефективност препоръчваме използването на стерилна ампула с активно вещество. Вземате серума с предостатъчната фина дозираща принцовка. За да направите това, внимателно отстранете бялата капачка от ампулата. Пробийте с иглата прегръдката с принцовката за събиране и издържайте с принцовката, за да я отворите. След това канюлата може лесно да се отстрани, за да се разнесе безопасно серума върху кожата. Серумът е вискозитетен и съдържа 10 мл. Необходимо е сависамо 2 до 3 мл за третиране на лицето, повече за тялото в зависимост от размера на третираната зона.

4. ИГ ЛИЧКА

Решете дали искате да извършите лечението в мрежов режим или безжично. Прикрепете желаната приставка за игла към устройството и се уверете, че е стабилна и не е повредена. Пуснете писалката за игла в действие с бутон ВКЛ./ ИЗКЛ. Желаната дължина на иглата може да се зададе с автоматичното устройство включено. Сега стегнете с два пръста областта на кожата, която искате да третирате. Плъзнете писалката по кожата в желания модел. Уверете се, че сте прободали всяка област от кожата между 5 и 8 пъти.

Важна забележка: По време на лечението писалката за игла никога не трябва да се обръща с главата надолу (главата на иглата с очилоре). Точността на иглата може да потече в отделенията на двигателя и да причини неправилна повреда (обратен поток на течността).

5. ХИДРАТАЦИЯ.

След процедурата каналите на кожата ви са отворени за около 15 минути и са особено податливи на вискозитетни масажи. Отстранете DERMIDA® Хидратираща маса от опаковката. Ако имате такава, отстранете двата защитни филма и поставете маската върху третираната част на тялото. Сега се отпуснете за 10 до 15 минути и осветете маската да си върши работата. След това отстранете маската и нежно масажирайте излишния серум.

6. РЕМОНТ.

Microneedling награвява кожата ви. Чувствителни и чувствителни типове кожа вече използват DERMIDA® Възстановяващ балсам след третиране. Това е интензивно овлажняващ антииритативен балсам за грижа за незабавна употреба с лед инжектиране. Възстановяващият балсам е хигиенично опакован в индивидуални сашета. Разкъсайте сашето и разнесете балсама върху кожата с кръгови движения. Осветете да се абсорбира напълно.

7. ЗАЩИТА

Microneedling е перфектен повсяко време нагдината. Ако третираната част от тялото е изложена на слънце, е необходимо с пещиална UV защита с висок слънчев защитен фактор. За целта отстранете тънкия и много бързо поглъщащ слънчев защитен крем DERMIDA® UV Protect Крем SPF 50+ и нанесете върху третираната зона.

8-МИ. ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА

Избягвайте да докосвате кожата си с ръка през следващите два часа. Избягвайте силно изпотяване, парни бани и пряка слънчева светлина в деня на лечението. Не се грижете. Сега съветът е най-добрата почивка за вашата кожа. Ако е необходимо, трябва да си мените калъфката на възглавницата си предварително. Вдните, които следват между процедурите, можете допълнително да подобрите резултатите от лечението със пещиалните дневни кремове от DERMIDA®.

ВНИМАНИЕ !

Опасност от къс съединение. Съществува риск от повреда на електронните компоненти, ако компонентите на писалката MEDICAL CONTROL бъдат демонтирани и почистени, докато все още са електрически свързани.

- Изключете захранването преди всяка работа по почистване и поддръжка.

ВНИМАНИЕ !

Повреда от течности. Ако препарати или дезинфектанти попаднат в крайника, контролния блок или захранването, може да възникне къс съединение.

Може също така да корозира електрически и механични компоненти.

- Никога не поставяйте крайника, контролния блок или захранващия блок в почистващи или дезинфектанти за потапяне.
- Никога не поставяйте крайника, контролния блок или захранването в автоклав или в автоклав Чиста ултразвукова вана.
- Съвместимост на материалите при избор на почистващи препарати и дезинфектанти обмисли.

7.1 ИНСПЕКЦИЯ

Прегледите могат да се извършват само от оторизирани търговеци. Препоръчваме да предавате NeedlingPen MEDICAL CONTROL на специализиран търговец на редовни интервали от 24 месеца за проверка с тегло на спецификации на производителя. Можете да направите това например с вашия специализиран търговец или на info@dermida.de контакт.

7.2 ДОГОВОРНИ МАТЕРИАЛИ

За да почистите писалката MEDICAL CONTROL, използвайте мек почистващ препарат на сушеноснова и дезинфектант, одобрени в съответната страна. Възоснова на следната съвместимост на материалите можете да прецените кои почистващи препарати и дезинфектанти са най-подходящи.

Повърхностите на NeedlingPen MEDICAL CONTROL са устойчиви на:

- леки киселини (т.е. бора киселина 10%, оцетна киселина 10%, лимонена киселина 10%)
- алифатни въглеводороди (напр. пентан, хексан)
- Етанол
- повечето неорганични соли и техните водни разтвори (напр. натриев хлорид, калциев хлорид, магнезиев сулфат)

Повърхностите на NeedlingPen MEDICAL CONTROL не са устойчиви на:

- силни киселини (напр. солна киселина 20%, сярна киселина 50%, азотна киселина 15%)
- окислителни киселини (напр. пероцетна киселина)
- алкални разтвори (т.е. сода каустик, амониак и всички съединения с $\text{pH} > 7$)
- ароматни/халогенирани въглеводороди (напр. фенол, хлороформ)
- Ацетон и бензин

7.3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ

Преди и след всяка употреба

- Кабелът на крайника, крайникът и ос таналата част на крайника заразени, както е описано в раздел „7.5. Почистване и дезинфекция на устройството“.

7.4 ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Външно почистване:

- Писалката NeedlingPen MEDICAL CONTROL и нейните принадлежности с една мека кърпа, напоена с почистващ дезинфекционен разтвор.

7.5 ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УСТРОЙСТВОТО

ВНИМАНИЕ !

Повреда от течности. Ако почистващи препарати или дезинфектанти попаднат в крайника, контролния блок или захранването, може да възникне къс съединение.

Може също така да корозира електрически и механични компоненти.

- Никога не поставяйте крайника, контролния блок или захранващия блок в почистващи или дезинфектанти за потапяне.
- Никога не поставяйте крайника, контролния блок или захранването в автоклав или в автоклав Чиста ултразвукова вана.
- Съвместимост на материалите при избор на почистващи препарати и дезинфектанти проверка.

8.1 НАКОНЕЧНИК, ЗАРЯДНОУСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИЯ

ВНИМАНИЕ !

Щети от падане. Ако накрайникът падне, той може да се повреди.

- Винаги и поставяйте наконечника върху равна, стабилна повърхност, така че да не го прави може да падне.
- Върнете накрайника в държача му след всяка употреба, за да го запазите безопасно.
- Ако накрайникът бъде изпуснат, проверете визуално компонентите.
- Занесете контролния модул или накрайника на оторизиран дилър, ако компонентите са видимо заети или вече не функционират нормално.
- Писалката NeedlingPen MEDICAL CONTROL и нейните принадлежности са моновъздушна опаковка за транспорт.

Винаги и съхранявайте NeedlingPen MEDICAL CONTROL и аксесоарите му при следните условия :

устройство	Писалка за игли MEDICAL CONTROL
температура на околната среда	-10°C до +40°C
Относителна влажност	10% до 90%
влагоуловна гъвкавост	540hPa до 1070hPa

8.2 ИГЛЕНИ МОДУЛИ

Винаги и съхранявайте стерилните иглени модули при следните условия :

устройство	Писалка за игли MEDICAL CONTROL
температура на околната среда	-15°C до +25°C
Относителна влажност	30% до 65%

9. ОБУЧЕНИЕ .

9.1 МЕДИЦИНСКИ МИКРОИДЛИНГ

Отговорност на доставящата компания (или който и да е от нейно име) е да осигури подходящо обучение, за да се научи какво е описано в това ръководство и да се гарантира, че лечението се извършва правилно. Въпреки това е силно препоръчително да се консултирате предварително с местните здравни власти за всяко задължение за посещаване на препоръчани или задължителни курсове за обучение с тегласно разпоредбите на различните страни.

9.2 ЕСТЕСТВЕН МИКРОДЕМИАБИЗИО

Отговорност на доставящата компания (или който и да е от нейно име) е да осигури подходящо обучение, за да се научи какво е описано в това ръководство и да се гарантира, че лечението се извършва правилно. В тази връзка ще се проведе обучение с вискоквалифициран персонал.

10. ГРАЖДАНСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ .

ОТГОВОРНОСТ

YOYU BRANDS GmbH не носи отговорност за безопасността, надеждността и ефективността на NeedlingPen MEDICAL CONTROL, ако:

- Без обучение от производителя или оторизиран търговец беше извършено.
- електрическата система на помещението, в което се намира NeedlingPen MEDICAL CONTROL е инсталирана не съответствие с приложимите закони, национални разпоредби за безопасност и европейски стандарти.
- устройството не отговаря на тези, съдържащи се в това ръководство. Използват се инструменти, препоръки и предупреждения .

YOYU BRANDS GmbH отхвърля всякаква отговорност за лични наранявания или щети на имуществото, причинени от неоторизирано манипулиране на устройството, липса или недостатъчна поддръжка и неспазване на разпоредбите, съдържащи се в това ръководство.

ДВАНДЕ С Е Т МЕС Е Ц А ГАРАНЦИЯ



Устройството има гаранция срещу дефекти в материалите и монтажа от завода за период от дванадесет месеца.

Не се покриват от гаранцията части, подлежащи на износване при нормална употреба и части, които са се повредили поради неправилна употреба или лоша поддръжка.

12. УСЛОВИЯ, КОИТО НЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ГАРАНЦИЯТА.

- Ремонт в резултат на природни бедствия, механичен удар, повреда на електрическата система, небрежност, неправилна употреба или злоупотреба с уреда, обслужване или ремонт по използване на материали и/или от лица, които не са упълномощени от YOYU BRANDS GmbH.
- Всички условия на употреба, които не са предвидени от производителя.
- Ремонтите се извършват в нашия завод или в специализирани сервизи. NeedlingPen MEDICAL CONTROL трябва да бъде изпратено предварително да бъдат одобрени от YOYU BRANDS GmbH. Транспортните разходи клиентът трябва да понесе.
- YOYU BRANDS GmbH не носи отговорност за каквито и да било прекъсвания или повреди на услугата, които се дължат на обстоен телствата, които не са представени.
- При никакви обстоятелства клиентът не може да изисква обезщетение за щети, причинени от претърпяна повреда на устройството.
- За допълнителна информация, моля, свържете се с kontakt@prpmed.de

ВНИМАНИЕ !

Устройството може да се повреди или да се прекъсне, ако не се обслужва редовно от YOYU GmbH или оторизиран сервизен център. Моля, свържете се със сервизен център приблизително на всеки 24 месеца с редовна употреба и износване на вътрешните компоненти.

13. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО.



Писалката NeedlingPen MEDICAL CONTROL, която сте закупили, изисква използването на специални материали и вещества при нейното производство. Може също така да съдържа опасни вещества, които, ако бъдат неправилно изпуснати в околната среда, могат да окажат въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

За да се предотврати изпускането на опасни вещества в околната среда и да се насърчи опазването на природните ресурси, производителят трябва да улесни повторната употреба, възстановяването и рециклирането на материалите, съдържащи се в устройството, когато потребителят възнамерява да изхвърли устройството. Публичните органи предприемат подходящи мерки, така че потребителите, дистрибуторите и производителите да допринасят за събирането на ОЕО и да ги задължават да ги използват повторно или рециклират. Когато изхвърляте устройството, имайте предвид, че се прилагат специални национални правни разпоредби:

- Не изхвърляйте уреда като битов отпадък, а го съберайте отделно. За да направите това, свържете се с компания, която е специализирана в изхвърлянето на електрически/електронни устройства като NeedlingPen MEDICAL CONTROL, или с местните власти за отпадък.
- Обмислете възможните вредни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат в опасни вещества, присъстващи в електрически и електронни устройства или неправилна употреба на устройствата или техните части се дължат. Устройството, за което се отнася товарноосвощително се състои от механични части, изработени от метал и пластмаси, както и електрически компоненти. Производителят не е настрана на потребителите на разположение при поискване, за да предостави всякаква информация относно устройствата, съдържащите се опасни вещества и тяхното възстановяване и повторна употреба или относно възможностите за повторна употреба на старото устройство.

prpmed.de

prpmed.de Funkner e. K
Kurstrasse 7,
63667 Bad Salzhausen

kontakt@prpmed.de
<https://prpmed.de>