



D E R M I D A
NAALDPEN MEDISCHE CONTROLE
GEBRUIKS- EN
ONDERHOUDSHANDLEIDING



/ INHOUDSOPGAVE.

1. Inleiding en informatie over deze handleiding	4	6. [MatriXneedling®] systeemtherapie	20
2. Belangrijke veiligheidsinstructies	6	6.1 Naaldkop en snelheidsniveaus	22
2.2. Productspecifieke veiligheidsinstructies	6	6.2 Toepassingsgebieden	23
2.3. Belangrijke voorzorgsmaatregelen voor de gezondheidsbescherming en veiligheid	7	6.3 Productselectie gezichtsbehandeling	32
2.4 Contra-indicaties en bijwerkingen	---	6.4 Productkeuze lichaamsbehandeling	38
2.4.1 Contra-indicaties voor Microneedling en microdermabrasie	---	6.5 Productkeuze Speciale toepassingsgebieden	42
2.5 Gebruikerskwalificaties vereist	9	6.6 Instructies: stap voor stap	44
2.6 Beoogd gebruik, toepassing		7. Reiniging en onderhoud	46
bereik en correct gebruik	9	7.1 Inspectie	46
2.6.1 Beoogd gebruik	9	7.2 Compatibele materialen	46
2.6.2 Toepassingsgebied	9	7.3 Desinfectie van de oppervlakken	47
2.6.3 Correct gebruik	10	7.4 Apparaat reinigen en desinfecteren	47
2.7 Symbolen op het product	10	8. Transport- en opslagvoorwaarden	48
3. Leveringsomvang	11	8.1 Handstuk, acculader	48
4. Informatie over het apparaat	11	8.2 Naaldmodules	48
4.1 Specificaties:	11	9. Opleiding	49
4.2 Bedrijfsomstandigheden	12	9.1 Medische Microneedling	49
4.3 Accessoires en reserveonderdelen	12	9.2 Esthetische microdermabrasie	49
5. Inbedrijfstelling en gebruik	13	10. Burgerlijke verplichting	49
5.1 Draadloze modus	14	11. Garantie:	50
5.2 Bedrade modus	14	12. Voorwaarden die niet onder de garantie vallen	50
5.3 Oplaadmodus	14	13. Opmerkingen over het afvoeren van het apparaat	51
5.4 In- en uitschakelen: AAN en UIT	15		
5.5 De stimulatiefrequentie instellen en de snelheid	16		
5.6 De beschermkap bevestigen handstuk en kabel	17		
5.7 De knooppuntmodules invoegen of vervangen	17		
5.8 Naaldmodus diepte-instelling	18		

1. INLEIDING EN INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING.

/ **BESTE KLANT, BESTE KLANT,**

Dank u voor de aanschaf van de DERMIDA® MEDICAL CONTROL en voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Met het apparaat dat je hebt gekocht, kun je in twee modi werken: in de draadlozeodus dankzij de ingebouwde lithiumbatterij of in deodus die wordt gevoed door een snoer.

De MEDICAL CONTROL kan worden uitgerust met verschillende accessoires (naaldpatronen) worden gebruikt om de volgende behandelingen uit te voeren:

- Medische microneedling
- Microdermabrasie

Medische microneedling wordt uitgevoerd met behulp van het handstuk waarop een steriele naaldmodule voor eenmalig gebruik is bevestigd. Deze naaldmodule bestaat uit kleine, puntige applicators (maximale lengte 2,5 mm) die microperforaties van de huid veroorzaken en, door de opperhuid en dermis te stimuleren, zorgen voor een sterke mechanische huidvernieuwing (collageeninductie). Daarna ziet de huid er stralender en steviger uit.

Microdermabrasie wordt uitgevoerd met behulp van het handstuk waaraan een steriele cartridge voor eenmalig gebruik is bevestigd. Het bestaat uit 130 kleine, puntige micro-applicators (maximale lengte 0,1 mm) die een homogeen peeling-effect creëren om huidvernieuwing en diepe reiniging te stimuleren, waarbij dode huidcellen worden verwijderd.

AANDACHT!

Het juiste behandelingsproces en de toepassing ervan is alleen gegarandeerd bij gebruik van gecertificeerde originele accessoires.

Gebruik geen niet-specifieke en niet-geteste producten (crèmes, emulsies, gels, serums, pigmenten) aangezien deze bijwerkingen en/of schade aan het accessoire kunnen veroorzaken

INLEIDING EN INFORMATIE OVER DIT HANDLEIDING

Deze gebruiksaanwijzing behandelt de technologie en het scala aan functies van de NeedlingPen MEDICAL CONTROL en de specifieke accessoires. Het bevat belangrijke informatie voor een veilige installatie, veilige bediening en onderhoud van het apparaat en voor het beoogde gebruik. Deze handleiding is beperkt tot alle informatie die essentieel is voor een veilig gebruik van het apparaat.

2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

2.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door.
- Deze handleiding is bedoeld voor alle personen die de
Gebruik, reinig, desinfecteer en bewaar de NeedlingPen MEDICAL CONTROL
of transport, op een toegankelijke plaats bewaren.
- Overhandig deze gebruiksaanwijzing bij elke eigendomsoverdracht van de NeedlingPen MEDICAL CONTROL.
- Volg de veiligheidsregels. Houd de werkplek hygiënisch schoon en zorg voor voldoende verlichting.
- Gebruik de NeedlingPen MEDICAL CONTROL alleen als het apparaat: accessoires en alle handstukkabels zijn in goede staat.
- Gebruik alleen originele accessoires en reserveonderdelen.

2.2 PRODUCTSPECIEKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Pas nooit de NeedlingPen MEDICAL CONTROL- , de naaldmodules of iets anders accessoires aan.
- Gebruik geen 220V wisselstroom aangezien dit brand of storingen kan veroorzaken.
- Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen de naald niet gebruiken
Speel Pen MEDISCHE CONTROLE.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het handstuk of de voeding komen penetratie.
- Vermijd storingsbronnen door in de buurt van de NeedlingPen MEDICAL . te zijn
BEDIENING Er worden geen mobiele apparaten gebruikt.
- Het handstuk tijdens gebruik door een handstukhoes bescherming
- Als de NeedlingPen MEDICAL CONTROL niet wordt gebruikt of volledig opgeladen is, de stekker uit het stopcontact halen en in de handstukhouder bewaren om te voorkomen dat het apparaat wegrolt of valt.
- De technische gegevens in deze handleiding
de bedrijfs-, transport- en opslagvoorwaarden in acht nemen en naleven
- De NeedlingPen MEDICAL CONTROL voor controle op a
Stuur naar uw dealer als het beschadigd is, als het niet normaal werkt, of als er vloeistof in het apparaat of het handstuk is gekomen.
- We raden u aan om de NeedlingPen MEDICAL CONTROL in de regel te gebruiken met matige tussenpozen van 24 maanden voor inspectie naar een erkende dealer worden gestuurd.

3 VEILIGHEIDBELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 2 GEZONDHEID EN

Microdermabrasie vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor de

Gezondheid en veiligheid die in de lijst zijn opgenomen.

Medische microneedling vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid, zoals aangegeven in de lijst, en mag alleen worden uitgevoerd door een voldoende opgeleid persoon, volgens de voorschriften en wetten die in verschillende landen van kracht zijn.

- Volg alle stappen om het apparaat voor de behandeling te desinfecteren.
- Draag wegwerpbaar nitril- of latexhandschoenen, oog- en lipbeschermingsmasker, wegwerpkap en schort voor aanvang van de behandeling en tijdens alle operaties.

- Het huidgebied van de patiënt vóór de behandeling met
reinigen met een mild schoonmaakmiddel en ontsmettingsmiddel.
U kunt ideale resultaten bereiken met de procedure van de matrix-naaldsysteembehandeling.

- Gebruik alleen actuele en steriele preparaten voor de behandeling
dit soort toepassingen zijn getest.
- Gebruik voor elke klant een nieuwe naaldmodule in steriele verpakking. Controleer vóór de behandeling of de
verpakking niet beschadigd is en dat de houdbaarheidsdatum niet is verstreken. Het
batchnummer van de gebruikte naaldmodules
noteer de betreffende klantenkaart om eventuele problemen te voorkomen
fabrikanten te melden.
- De naaldmodules zijn steriele wegwerpproducten (consumables) en
mag slechts één keer worden gebruikt.
- De gebruikte of defecte cartridges en hun verpakking
beschadigd is, in een speciale container volgens de voorschriften in uw land
volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Zorg ervoor dat de naaldmodules nooit in contact komen met verontreinigde voorwerpen, zoals b.v. B.
kleding in aanraking komt. Verontreinigde naaldmodules mogen niet worden gebruikt en moeten
onmiddellijk worden weggegooid

- Tijdens gebruik moet het handstuk volledig bedekt zijn met een
beschermende film zijn bedekt. Het handstuk moet vóór het aantrekken zijn
van de naaldmodules zijn bedekt met een beschermfolie.
- Het handstuk periodiek voor zichtbare vervuiling
controleren.
- Houd het handstuk altijd stevig vast voordat u het inschakelt of op de plank plaatst. Als een onbeveiligd
handstuk wordt ingeschakeld, kan het door trillingen bewegen en letsel veroorzaken.

- Zorg ervoor dat u de klant erop wijst dat de contactpersoon
te vermijden met de vers behandelde huid. Vers behandelde huidgebieden moeten worden beschermd
tegen besmetting en UV-straling.
- Andere irritante situaties zoals zwembad- en saunabezoek, ablatieve of chemische peeling en
ontharen van de behandelde
Vlekken moeten de eerste twee tot drie dagen na de behandeling worden vermeden.

2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES.

2.4 CONTRA-INDICATIES EN BIJWERKINGEN

Indien de verantwoordelijke voor de behandeling ook maar de minste twijfel heeft dat de veiligheid van de te behandelen patiënt niet gegarandeerd is, b.v. B. wegens ziekte of secundaire aandoeningen dient de behandeling per direct te worden onderbroken of gestaakt.

2 . 4 . 1 CONTRA-INDICATIESFORMICRONAALINGEN MICRODERMABRASIE:

- Personen die lijden aan allergieën, epilepsie, infecties of auto-immuunziekten
ziekten, infecties van de luchtwegen, het cardiovasculaire systeem of de te behandelen huid.
- Personen die lijden aan ziekten of die worden behandeld met medicijnen
die de normale re-epithelialisatie van de huid veranderen (bijv. diabetes, mediterrane anemie, enz.) of
die chemotherapie ondergaan.
- Elke vorm van actieve acne in het te behandelen gebied.
- Als de behandeling gecombineerd wordt met andere esthetische
medische behandelingen die de dikte en integriteit van de opperhuid aantasten.
- Open wonden, eczeem of uitslag in het te behandelen gebied
Gebied.
- Om mensen te behandelen met zichtbaar oedeem en blauwe plekken in de
het gebied.
- Systemische infecties en virale ziekten (bijv. hepatitis A, B, C,
D, E of F, HIV-infectie) of acute lokale huidinfecties (bijv. herpes,
couperose).
- Tijdens chemotherapie, bestralingstherapie of hoge doses
therapie met corticosteroïden
- Zwangerschap en borstvoeding
- Personen onder de 18 jaar zonder toestemming van de ouders of voogd.

2.4.2 ONGEWENSTE REACTIES

In sommige gevallen kunnen tijdens en na de behandeling milde bijwerkingen optreden. Deze bijwerkingen
staan hieronder vermeld.

- Ongemak op de eerste dag van de behandeling • Huidirritatie
(zoals jeuk of een warm gevoel in het behandelde gebied), die gewoonlijk optreedt binnen de eerste 12 tot
72 uur na de behandeling
verdwijnen
- Milde, tijdelijke huidexfoliatie die gewoonlijk binnen acht dagen verdwijnt

2 . 5 VEREISTE GEBRUIKERSKWALIFICATIES

De NeedlingPen MEDICAL CONTROL en de accessoires mogen niet worden gebruikt door personen met
beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of door kinderen. Het apparaat en de accessoires
mogen niet worden gebruikt door personen zonder ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen.

De NeedlingPen MEDICAL CONTROL mag alleen worden gebruikt door personeel dat aan de volgende eisen
voldoet:

- Passende opleiding van de fabrikant of diens distributeur of andere bevoegde instantie, zowel met betrekking
tot de veiligheidsaspecten (zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing) als de technische, hygiënische en
esthetische aspecten van de behandelingen.
- Basiskennis van medische microneedling en microdermabrasie • Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
- Kennis van de risico's en bijwerkingen

2.6 BEDOELD GEBRUIK, OM - TOEPASSINGSGBIED EN JUIST GEBRUIK

2.6.1 BEDOELD GEBRUIK

Met de NeedlingPen MEDICAL CONTROL kunt u met verschillende
Accessoires (naaldpatronen) om de volgende behandelingen uit te voeren:

- Voor medische microneedling: de steriele wegwerpnaaldmodule, bestaande uit puntige applicators
(maximale lengte 2,5 mm), werd
specifiek voor de medische behandeling van een gezonde huid met als doel:
ontwikkeld voor huidverjonging. Bij microneedling worden de oppervlaktelagen van de huid
gestimuleerd en kunnen tijdens het mechanische proces microlaesies ontstaan. Daarna heeft de
huid een pauze nodig om cellen uit te wisselen en te regenereren.
- Voor microdermabrasie: speciale steriele naaldpatronen voor eenmalig gebruik met:
speciale, puntige micro-applicators (maximale lengte 0,1 mm) die een homogeen peeling-
effect creëren om
Stimuleert huidvernieuwing en dieptereiniging en verwijdert dode huidcellen.

2.6.2 TOEPASSINGSGBIED

- Toepassingen voor medische microneedling:
- Behandeling van lijntjes/rimpels voor huidverjonging • Fysiologische
verbetering van de huidactiviteit door stimulatie
de opperhuid
 - Behandeling van littekens, acnelittekens en striae
 - Hyperpigmentatie

- Toepassingen voor microdermabrasie:
- Behandeling voor de esthetische correctie van gezichtsimperfecties
en op het lichaam

2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

2.6.3 JUIST GEBRUIK

Alle behandelingen die met de NeedlingPen MEDICAL CONTROL worden uitgevoerd (medische microneedling en microdermabrasie) moeten plaatsvinden in een droge, schone, rookvrije ruimte onder perfecte hygiënische omstandigheden. De NeedlingPen MEDICAL CONTROL moet worden voorbereid, gebruikt en verzorgd zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Met name moet worden voldaan aan de geldende eisen voor de inrichting van werkplekken en de te gebruiken materialen.

Correct gebruik betekent ook dat deze handleiding, in het bijzonder paragraaf "2.2 [Productspecifieke veiligheidsinstructies](#)", volledig is gelezen en begrepen.

Correct gebruik vereist alleen de volgende patiëntengroepen:

- Gezonde volwassen mannen en vrouwen

Onjuist gebruik vindt plaats wanneer de NeedlingPen MEDICAL CONTROL of de accessoires worden gebruikt op een andere manier dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing of wanneer de gebruiksomstandigheden niet in acht worden genomen. De behandeling is verboden, vooral in het geval van contra-indicaties (zie paragraaf "2.4 [Contra-indicaties](#)")

2.7 SYMBOLEN OP HET PRODUCT

De hieronder beschreven symbolen zijn te vinden in deze gebruiksaanwijzing, op de NeedlingPen MEDICAL CONTROL en zijn accessoires of op de verpakking:

symbolen	betekenis
	Gevaar!
	De NeedlingPen MEDICAL CONTROL komt overeen met de: Richtlijnen 2006/42/EG en 2004/108/EG
IP21	De behuizing biedt bescherming tegen grof stof en Waterdruppel
IPX6	De case biedt bescherming tegen waterdruppels

3. LEVERINGSOMVANG.

/ LEVERINGSOMVANG

1x handstuk

1x kabel voor het handstuk

1x acculader

1x handstukbakje

1x gebruiks- en onderhoudshandleiding

2x naaldmodules

De voor de behandelingen benodigde beschermhoezen van het handstuk zijn niet bij de levering inbegrepen. Passende accessoires voor het handstuk kunnen worden aangevraagd bij geautoriseerde dealers of onze online shop, zie "4.3 [Accessoires en reserveonderdelen](#)".

4. APPARAATINFORMATIE.

4.1 TECHNISCHE SPECIFICATIES

apparaat	MEDISCHE CONTROLE naaldpen
nominale spanning	5VDC
energieverbruik	1w
batterijmodel	Modelcode: 13/00294-00
beschermingsklasse	2
frequentie oscillatie:	Snelheid 1: 108 pulsen/sec Snelheid 2: 111 pulsen/sec Snelheid 3: 115 pulsen/sec Snelheid 4: 119 pulsen/sec Snelheid 5: 121 pulsen/sec Snelheid 6: 126 pulsen/sec
motor	DC-precisiemotor
bedrijfsmodus:	Draadloze
Productafmetingen (L x B x H)	185 mm x 170 mm x 72 mm
Gewicht handstuk	80g
totale gewicht	600g

4. APPARAATINFORMATIE.

4.2 BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

apparaat	MEDISCHE CONTROLE naaldpen
bedrijfstemperatuur	+15 °C tot +25 °C
vochtigheid	30% tot 75%
luchtdruk	700hPa tot 1070hPa

4.3 ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

De volgende accessoires en reserveonderdelen zijn alleen verkrijgbaar bij geautoriseerde dealers.

Accessoires	Beschrijving artikel	hoeveelheid
Naaldmodules voor microdermabrasie	130AN	1 stuk in steriele verpakking
Naaldmodules voor medische microneedling	9MN 0.18	1 stuk in steriele verpakking

reserveonderdeel	Omschrijving	inhoud	hoeveelheid
Handstuk NeedlingPen MEDISCHE CONTROLE	naaldpen MEDISCHE CONTROLE	1	1
lithium batterij	-	1	1
Handstuk kabel	-	1	1
stekker	13/00294-00	1	1
handleiding	-	1	1

5. INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK.

De NeedlingPen MEDICAL CONTROL kan in twee verschillende modi worden bediend: in draadloze modus zonder kabel en in modus met een aangesloten AC-voedingskabel.

ACCU.

Oplaadbare batterij

ADVERTENTIE.

Inschakelen / snelheidswaergave

KNOP.

Aan/uit-knop

DUBBELE SCHAAL.

Dubbele werkinstellingsschaal (PD/DS-systeem)

NAALDMODULES.



5. INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK.

5.1 DRAADLOZE MODUS: NAALDPEN MEDISCHE CONTROLE

Het apparaat wordt gebruikt door de interne batterij te laten werken, zonder kabelverbinding.

5.2 BEDRADE MODUS: NAALDPEN MEDISCHE CONTROLE

Het apparaat werkt op netstroom door het met de kabel op een stopcontact aan te sluiten

1. Sluit de power pack aan met de jackplug
2. Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact
3. Om de batterij op te laden: Steek de AC-adapter in een stopcontact en sluit aan op de uitgang van de voeding

5.3 LAADMODUS



LADEN (ROOD).

Tijdens het opladen licht de oplaadindicator rood op



GELADEN (GROEN).

Wanneer het opladen is voltooid, wordt de oplaadindicator groen

5.4 IN- EN UITSCHAKELLEN: AAN EN UIT

AANDACHT!

Als het handstuk bij het inschakelen niet stevig wordt vastgehouden, kan het door de trillingen ongecontroleerd bewegen.

- Houd het handstuk stevig vast voordat u het inschakelt.



ZET AAN / UIT.

In- en uitschakelen van de Naaldpen MEDISCHE CONTROLES

Houd de aan/uit-knop 2-3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen

AANDACHT!

Wanneer u de MEDICAL CONTROL NeedlePen in bedrade modus gebruikt, pas dan op dat u niet over het snoer struikelt. Een misplaatste kabel kan struikelgevaar opleveren.

- Zorg ervoor dat alle kabels zo worden gelegd dat niemand erover kan struikelen of dat ze onbedoeld kan trekken.

AANDACHT!

Gevaar voor storing van de MEDICAL CONTROL-naaldpen. Ongeschikte accessoires en reserveonderdelen kunnen de werking en veiligheid van de MEDICAL CONTROL-naaldpen nadelig beïnvloeden. De NeedlePen MEDICAL CONTROL kan beschadigd raken, defect raken of defect raken.

- Alleen de naaldmodules vermeld in hoofdstuk "4.3 Accessoires en reserveonderdelen" op pagina 12. Gebruik accessoires en reserveonderdelen.

5. INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK.

5.5 DE STIMULATIEFREQUENTIE EN SNELHEID INSTELLEN

Wanneer de NeedlingPen MEDICAL CONTROL in de bedrijfsmodus staat, kan de stimulatiefrequentie worden gewijzigd of geregeld door kort op de aan-knop te drukken. Het apparaat kan met in totaal zes verschillende snelheden worden bediend. Het handstuk begint bij lage snelheid en gaat over naar hoge snelheid.



SNELHEIDSWEEERGAVE.

De standaardsnelheid is 108 stimulaties per seconde. De besturingseenheid wordt bij elke inschakeling automatisch teruggezet naar deze standaardinstelling. De NeedlingPen MEDICAL CONTROL heeft een frequentiebereik van 108 - 126 (1-6 snelheidsniveaus) oscillaties per seconde en kan in zes niveaus worden aangepast.

AANDACHT!

Condensatieschade: Als de NeedlingPen MEDICAL CONTROL wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen, bijvoorbeeld tijdens transport, kan condens zich binnenin verzamelen en de elektronische componenten beschadigen.

- Zorg ervoor dat de NeedlingPen MEDICAL CONTROL vóór gebruik op kamertemperatuur is gekomen. Als de NeedlingPen MEDICAL CONTROL is blootgesteld aan temperatuurschommelingen, minimaal 3 uur per 10 °C voor gebruik wachten op temperatuurverschil.
- De NeedlingPen MEDICAL CONTROL alleen bij een kamertemperatuur tussen +15 °C en +25 °C.

AANDACHT!

Verminderde functionaliteit door elektromagnetische interferentie.

Draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur: Apparaten zoals mobiele telefoons of WLAN-routers kunnen de werking van de NeedlingPen MEDICAL CONTROL beïnvloeden door elektromagnetische straling uit te zenden. Een veilige werking van de NeedlingPen MEDICAL CONTROL is niet langer gegarandeerd.

- Vermijd storingsbronnen door ervoor te zorgen dat er geen draagbare of mobiele apparaten worden gebruikt in de buurt van de NeedlingPen MEDICAL CONTROL.
- Informeer patiënten over het risico van storingsbronnen.


5.6 BESCHERMENDE DEKSEL AAN HANDSTUK EN KABEL BEVESTIGEN

Om het handstuk en de kabel te beschermen tegen verontreiniging tijdens de behandeling, raden wij aan om een wegwerpbare kabelhoes met een diameter van 20-27 mm op het handstuk te monteren.

5.7 NAALDMODULES PLAATSEN OF VERVANGEN

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR DE NAALDMODULES VOOR MICRONEEDLING EN MICRODERMABRASIE

- Alleen originele naaldmodules voor medische microneedling en microdermabrasie gebruik dat geschikt is voor het meegeleverde handstuk.
- Schakel het handstuk uit voordat u de naaldmodules vervangt.
- Gooi de gebruikte naaldmodule die niet meer nodig is voor de huidige behandeling weg.
- De naaldmodules worden in steriele verpakking verzonden. Vlak daarvoor Verwijder het gebruik uit de steriele verpakking.
- Plaats het handstuk altijd zo op de handstukhouder dat de naaldmodule niet rust op het oppervlak.
- Schakel het handstuk uit.
- Houd de basis van de patroon vast om deze in het handstuk te plaatsen.

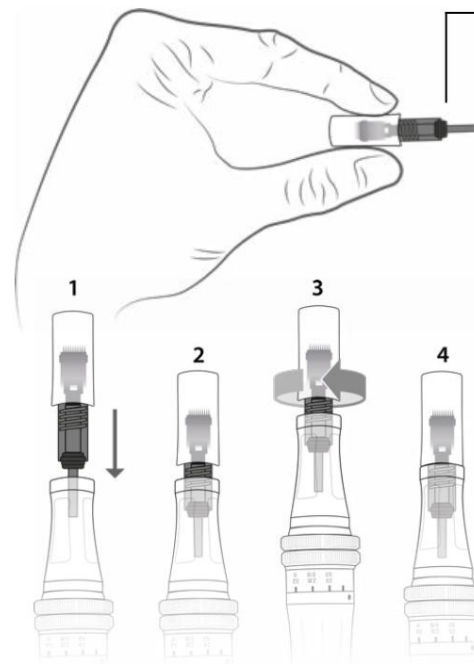

EEN KENNISGEVING.

Hoe de naaldpatroon vast te pakken.

- De naaldmodule in de draad connector van het handstuk. De naaldmodule kan in alle mogelijke oriëntaties worden gebruikt.
- Draai de naaldpatroon met de klok mee totdat u weerstand voelt. De naaldmodule is nu op zijn plaats stevig in het handstuk.
- Controleer of de naaldmodule correct is geplaatst.
- Om de naaldmodule te verwijderen, draai de naaldpatroon linksom en uit het handstuk nemen.

5. INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK.

5.8 NAALDMODUS DIEPTE-AFSTELLING

AANDACHT!

- De mate van uitsteeksel (naaldlengte) afhankelijk van de behandeling (medische) microneedling of microdermabrasie), de indicatie en de bijbehorende naaldmodus.
- De mate van uitsteeksel afhankelijk van de kenmerken van de huid van de cliënt
Kies de cliënt en het te behandelen gebied.

Voor een betere visuele controle is het raadzaam om de mate van uitsteeksel aan te passen terwijl het handstuk is ingeschakeld.


Het handstuklichaam is uitgerust met een gepatenteerd dubbel verstelsysteem met PD/DS-technologie, het Performance Deep / Double System, dat de ingestelde mate van uitsteeksel aangeeft.

Dit instelsysteem stelt de operator in staat nauwkeurig te werken, omdat hij altijd precies weet hoe ver de naaldmodule uitsteekt voor alle soorten behandelingen (microneedling, microprikken en microdermabrasie).

- Zet het handstuk aan.
- De mate van uitsteeksel door draaien van het beweegbare deel van het handstuk afstellen. Gebruik de schaal als richtlijn en draai totdat de markering zich in de gewenste positie bevindt. Door Met de klok mee draaien (wanneer u naar de cartridge kijkt) verhoogt de mate van uitsteeksel.

EEN KENNISGEVING.

Hoe de mate van uitsteeksel aan te passen.

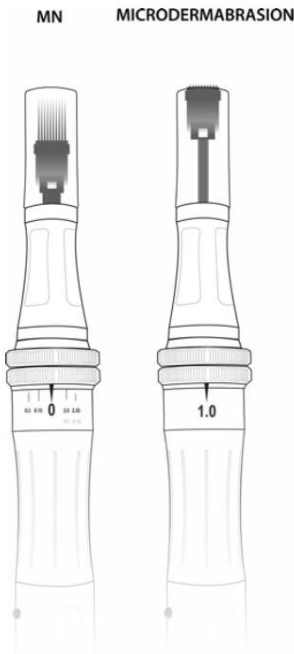

DERMIDA

[MATRIXNEEDLING®]
SYSTEEMTHERAPIE



6. TOEPASSING: [MATRIXNEEDLING®] SYSTEEMTHERAPIE.

/ DE SYSTEMISCHE BEHANDELING VAN PROBLEEMZONES.

Om de medische behandeling met microneedling systematisch uit te voeren, heeft u naast het apparaat ook steriele serums en verzorgingsproducten nodig. Door speciaal op elkaar afgestemde actieve ingrediënten kunt u het beste uit de behandeling halen.

8 STAPPEN VOOR EEN PERFECT RESULTAAT:



SCHOONMAAK

Voor de microneedling moet de huid grondig, maar toch heel voorzichtig, worden verwijderd van dode huidcellen, talg, make-up en huidonzuiverheden. Tegelijkertijd kunnen de huidbarrière en de natuurlijke beschermende functie van de huid worden versterkt met hoogwaardige reinigingsmiddelen. We bieden de Treatment Cleanser (Basic Series) voor de gevoelige, normale en gecombineerde huid en de Treatment Purifying Cleanser voor de vette huid die vatbaar is voor acne.

Actieve ingrediënten: ceramiden, bamboe-extract, allantoine, toverhazelaar, vitamine E



PELLEN

Na de basisreiniging wordt de huid optimaal voorbereid op de behandeling met een enzympeeling. Dit verwijdert niet alleen dode huidcellen, maar zet ook de koers voor een snelle huidvernieuwing na de ingreep. We gebruiken ingekapselde papaja-enzymen en bromelaine in onze Enzymatic Treatment Peeling, omdat beide actieve ingrediënten bijzonder zachttaardig zijn gebleken.

Actieve ingrediënten: papaja-extract, bromelaine, mannitol, vitamine E



SERUM

Over het algemeen heeft u twee mogelijkheden om de toepassing microneedling te combineren met een therapie met werkzame stoffen (serum). Ofwel werk je direct met de naaldstift in een steriel serum, ofwel gebruik je na de behandeling een nazorgserum. Vanwege de farmaceutische zuiverheid en de hogere effectiviteit raden wij het gebruik van een steriele ampul met werkzame stof aan. Met 13 steriele meso-serums bieden we een unieke variëteit waarmee je specifiek esthetische oneffenheden kunt behandelen. Voor intensieve hydratatie is vaak een eerste behandeling met de Hyaluron Booster aan te raden. De samenstelling van actieve ingrediënten varieert sterk per toepassingsgebied.



NAALDEN

Wij zijn de pioniers op het gebied van microneedling en collageeninductietherapie in Duitsland. Bij het naalden met de elektrische naaldpen wordt een naaldkop op en neer bewogen, wat resulteert in tot 18.000 slagen per minuut met hoogwaardige apparaten. Tijdens deze op- en neergaande beweging wordt de naaldpen over de huid geleid, waardoor er kleine verticale gaatjes in het huidoppervlak achterblijven, de zogenaamde perforatie. Dit proces brengt een reeks biologische processen op gang die de huid helpen zichzelf te "herstellen" en te vernieuwen. Op deze manier kan een groot aantal huidproblemen effectief worden behandeld. Het streven is 200 tot 250 lekke banden per cm² voor een optimaal resultaat.



HYDRATATIE

Onze unieke Hydratatiemaskers zijn beschikbaar voor zowel gezichts- als lichaamsbehandelingen. Ze zorgen voor een intensieve hydratatie van de huid, ondersteunen het regeneratieproces van de huid en stimuleren de lichaamseigen aanmaak van elastine en collageen. Roodheid, irritatie, microtranen en droogheid worden onmiddellijk verminderd. Met dit powermasker heb je na de behandeling gegarandeerd geen serum meer nodig.

Actieve ingrediënten: Matrixyl®, Niacinamide, Hyaluronzuur, Gatuline Expression AF, iActive-Complex, ProdeW 500, Cactusvijgwater



REPARATIE

Na de behandeling is onmiddellijke eerste hulp vereist. Onze Post Treatment Repair Balm levert precies dat. De crème versterkt de verzwakte huidbarrière en brengt de huidbalans weer in balans. Het regelt ook de pH van de huid. Intensief verzorgend, herstellend en constructief. Voor een beter gebruik is de crème hygiënisch verpakt in individuele sachets.

Actieve ingrediënten: Bifida Ferment Lysate, Allantoine, Ureum, Hyaluron



BESCHERMEN

U kunt uw huid na de behandeling goed beschermen door uw persoonlijke gedrag. Voor invloeden van buitenaf - zoals UV-straling - heb je onze UV Protect Cream SPF50+. Het is een UV-beschermende, herstellende, dunne en zeer snel intrekende zonnbeschermingscrème met een hoge zonnbeschermingsfactor van 80. Het is gebaseerd op bewezen UVB- en UVA-filters, evenals voedende ingrediënten voor huidstabilisatie.

Actieve ingrediënten: DNA-reparatie-enzymen, eiwitten, planktonextract



DAGELIJKE ZORG

Haal meer uit uw behandeling. Met dagcrèmes speciaal afgestemd op uw behandelingsdoel, kunt u de behandeling optimaal aanvullen. Wij hebben dagbehandelingen voor anti-aging, cellulitis, pigmentvlekken, littekens of een vette huid. Gebruik hiervoor de crème als dagverzorging op alle dagen tussen uw behandelingen. De samenstelling van actieve ingrediënten varieert sterk per toepassingsgebied.

6.1 NAALDKOP / SNELHEIDSNIVEAUS.

GEVAAR:

Gebruik alleen originele DERMIDA®-accessoires voor het juiste apparaat.
De naaldkoppen van de X-tra CONTROL- of SMART CONTROL-naaldpen passen niet op de MEDICAL CONTROL en omgekeerd, omdat ze verschillende vergrendelingstechnieken hebben.

SNELHEIDSNIVEAUS:

De hier vermelde combinaties zijn slechts richtwaarden. De daadwerkelijk gebruikte instellingen kunnen variëren op basis van de voorkeur van de behandelaar of het huidtype.

naald diepte	snelheid
0.2mm-0.5mm	1 tot 2
0,5 mm - 1,0 mm	2 tot 3
1,0 mm - 1,5 mm	3 tot 4
1,5 mm - 1,0 mm	4 tot 5
2,0 mm - 2,5 mm	5 tot 6

NAALDPEN MEDISCHE CONTROLE NAALDKOPPEN.

 Nr. DA130058-2	nano Pijnloze levering van actieve ingrediënten zonder downtime, Lippen, BB Glow, Algemene huidvernieuwing, Nano Peels, microdermabrasie
 Nr. DA130055-2	9s Littekens, acnelittekens, striae, cellulitis, lokale vetophopingen, diepe rimpels, melasma, rimpels, grove poriën, hyperpigmentatie, huidverkleuring

D E R M I D A

[MATRIXNEEDLING ®]
TOEPASSINGSGEBIEDEN



6.2 TOEPASSINGSGEBIEDEN.

toepassingsgebieden	dunne huid	dikke huid	snelheid	serum	notities
 voorhoofd rimpels	0.25mm-0.5mm	0,5 mm - 0,75 mm	1 - 3	 Argireline + Peptideboosters *	
 fronslijn	0.25mm-0.5mm	0,5 mm - 1,0 mm	1 - 3	 Argireline + Peptideboosters *	
 gebied rond de ogen (kraaienpootjes, oogrimpels, wallen onder de ogen)	0,25 mm	0.25mm-0.5mm	1	 Omkering van de oogcontour	
 neus en neusbrug	0,25 mm	0,5 mm	1 - 3	 Hyaluronzuur booster	
 superieur jukbeenderen	0,5 mm	0,5 mm - 1,0 mm	1 - 3	 Intense anti-aging*	

6.2 TOEPASSINGSGEBIEDEN.

toepassingsgebieden	dunne huid	dikke huid	snelheid	serum	notities
 mondstuk (mondhoeken, marionetten en neus-lippenplooiën)	0,5 mm - 1,0 mm	1,0 mm - 1,5 mm	2 - 4	 Argireline + Peptideboosters *	
 hyperpigmentatie en ouderdomsvlekken	0,5 mm - 0,75 mm	0,75 mm - 1,0 mm	2 - 3	 Huidskleur imperfectie Controle	
 littekens en acne littekens	1,0 mm - 1,25 mm	1,5 mm - 2,0 mm	3 - 5	 Rekken en littekenomkering	
 Grote poriën	0,5 mm	0,5 mm	2	 Retinol + Vitamine C booster	
 Sterke rimpels (In totaal)	0,75 mm - 1,0 mm	1,0 mm	3 - 4	 Intense anti-aging*	

* Initiële behandeling, indien nodig, voor intensieve hydratatie uitvoeren met de Hyaluron Booster.

6.2 TOEPASSINGSGEBIEDEN.

toepassingsgebieden	dunne huid	dikke huid	snelheid	serum	notities
 uitrekken en Striae	1,5 mm	1,5 mm	4 - 5	 Rekken en littekenomkering	
 litteken	0,75 mm - 1,5 mm	0,75 mm - 1,5 mm	3 - 5	 Rekken en littekenomkering	
 pigmentvlekken	0,5 mm - 0,75 mm	0,75 mm - 1,0 mm	2 - 3	 Huidskleur imperfectie Controle	
 cellulitis	1,0 mm - 1,5 mm	1,0 mm - 1,5 mm	3 - 5	 cellulitis omkering	
 Lokale vetkussentjes	1,0 mm - 1,5 mm	1,0 mm - 1,5 mm	3 - 5	 Lipolyse Booster	

6.2 TOEPASSINGSGEBIEDEN.

toepassingsgebieden	dunne huid	dikke huid	snelheid	serum	notities
 haargroei	0.25mm-0.5mm	0,25 mm - 0,75 mm	1 - 3	 Haargroeiboosters	
 lippen	0.25mm-0.5mm	0.25mm-0.5mm	1 - 2	 lipversterker	
 vettige huid	0.25 mm - 1,0 mm	0,25 mm - 1,0 mm	1 - 3	 Omkering van acne en vette huid	
 BB gloed	0.25mm-0.4mm	0.25mm-0.4mm	1 - 2	 DM Cell Brightening Foundation*	

* Let op onze aparte BB Glow instructies.

6.3 GEZICHTSBEHANDELING PRODUCTSELECTIE.

HUDVERNIEUWING EN RIMPELPREVENTIE



SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel

Nr. DA161206



PELLEN
enzymatisch
Behandelingsscrub

Nr. DA143732



SERUM
EGF-celbooster

Nr. DA155601-1



NAALDEN
Naaldstift 0,25
mm

Nr. DA300165



HYDRATATIE
Hydratatie gezichtsmasker

Nr. DA143722-1



REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem

Nr. DA141852



BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+

Nr. DA113200



DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Basis serie

Nr. DA143727

LICHTTE TOT MIDDELGROTE RIMPELS



SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel

Nr. DA161206



PELLEN
enzymatisch
Behandelingsscrub

Nr. DA143732



SERUM
Hyaluronzuur booster

Nr. DA180051-3



NAALDEN
Naaldstift 0,5 mm

Nr. DA300165



HYDRATATIE
Hydratatie gezichtsmasker

Nr. DA143722-1



REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem

Nr. DA141852



BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+

Nr. DA113200



DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Basis serie

Nr. DA143727

DIEPE RIMPELS



SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel

Nr. DA161206



PELLEN
enzymatisch
Behandelingsscrub

Nr. DA143732



SERUM
Intense anti-aging*

Nr. DA155613-1



NAALDEN
Naaldstift 0,75
mm - 1,0 mm

Nr. DA300165



HYDRATATIE
Hydratatie gezichtsmasker

Nr. DA143722-1



REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem

Nr. DA141852



BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+

Nr. DA113200



DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Basis serie

Nr. DA143727

* Initiële behandeling, indien nodig, voor intensieve hydratatie uitvoeren met de Hyaluron Booster.

6.3 GEZICHTSBEHANDELING PRODUCTSELECTIE.

VOORHOOFD RIMPES

							
SCHOONMAAK behandelingen reinigingsmiddel	PELLEN enzymatisch Behandelingsscrub	SERUM Argireline + peptiden Booster*	NAALDEN Naaldstift 0,75 mm	HYDRATATIE Hydratatie gezichtsmasker	REPARATIE na de behandeling Reparatie balsem	BESCHERMEN UV-bescherming Crème SPF 50+	DAGELIJKSE ZORG Dagelijkse behandeling zorg Basis serie
Nr. DA161206	Nr. DA143732	Nr. DA155614-1	Nr. DA300165	Nr. DA143722-1	Nr. DA141852	Nr. DA113200	Nr. DA143727

PERIORAL LIJNEN (HOEK VAN DE MOND, MARIONET EN NASOLABIALE LIJNEN)

	Geen peeling aan te raden.						
SCHOONMAAK behandelingen reinigingsmiddel		SERUM Argireline + peptiden Booster*	NAALDEN Naaldstift 1,0 mm	HYDRATATIE Hydratatie gezichtsmasker	REPARATIE na de behandeling Reparatie balsem	BESCHERMEN UV-bescherming Crème SPF 50+	DAGELIJKSE ZORG Dagelijkse behandeling zorg Basis serie
Nr. DA161206		Nr. DA155614-1	Nr. DA300165	Nr. DA143722-1	Nr. DA141852	Nr. DA113200	Nr. DA143727

PERIORBITALE RIMPES (OOGRIMPES, KOEVOETJES EN ZAKKEN)

	Geen peeling aan te raden.						
SCHOONMAAK behandelingen reinigingsmiddel		SERUM Oogcontour omkering	NAALDEN Naaldstift 0,25 mm	HYDRATATIE Hydratatie gezichtsmasker	REPARATIE na de behandeling Reparatie balsem	BESCHERMEN UV-bescherming Crème SPF 50+	DAGELIJKSE ZORG Dagelijkse behandeling zorg Basis serie
Nr. DA161206		Nr. DA155607-1	Nr. DA300165	Nr. DA143722-1	Nr. DA141852	Nr. DA113200	Nr. DA143727

6.3 GEZICHTSBEHANDELING PRODUCTSELECTIE.

GROTE PORIN



**SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel**

Nr. DA161206



**PELLEN
enzymatisch
Behandelingsscrub**

Nr. DA143732



**SERUM
Retinol + Vitamine C
booster**

Nr. DA155608-1



**NAALDEN
Naaldstift 0,5 mm**

Nr. DA300165



**HYDRATATIE
Hydratatie gezichtsmasker**

Nr. DA143722-1



**REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem**

Nr. DA141852



**BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+**

Nr. DA113200



**DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Basis serie**

Nr. DA143727

LITTEKENS EN ACNE-LITTEKENS



**SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel**

Nr. DA161206



**PELLEN
enzymatisch
Behandelingsscrub**

Nr. DA143732



**SERUM
Rekken & litteken
omkering**

Nr. DA155605-1



**NAALDEN
Naaldstift 1,0 mm**

Nr. DA300165



**HYDRATATIE
Hydratatie gezichtsmasker**

Nr. DA143722-1



**REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem**

Nr. DA141852



**BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+**

Nr. DA113200



**DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Stretch & Litteken Serie**

Nr. DA143731

PIGMENTELE EN LEEFTIJDSMARKTEN



**SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel**

Nr. DA161206



**PELLEN
enzymatisch
Behandelingsscrub**

Nr. DA143732



**SERUM
huidskleur
Imperfectiecontrole**

Nr. DA155606-1



**NAALDEN
Naaldstift 1,0 mm**

Nr. DA300165



**HYDRATATIE
Hydratatie gezichtsmasker**

Nr. DA143722-1



**REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem**

Nr. DA141852



**BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+**

Nr. DA113200



**DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Huidskleur serie**

Nr. DA143730

6.4 PRODUCTSELECTIE LICHAAMSBEHANDELING .

LITTEKENS, STRETCH MARK EN ZWANGERSCHAP MARK



SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel

Nr. DA161206



PELLEN
enzymatisch
Behandelingsscrub

Nr. DA143732



SERUM
Rekken & litteken
omkering

Nr. DA155605-1



NAALDEN
Naaldstift 1,0 mm

Nr. DA300165



HYDRATATIE
hydratatie lichaam
masker

Nr. DA143723-1



REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem

Nr. DA141852



BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+

Nr. DA113200



DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Stretch & Litteken Serie

Nr. DA143731

LICHAAMSRIMPELS



SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel

Nr. DA161206



PELLEN
enzymatisch
Behandelingsscrub

Nr. DA143732



SERUM
Retinol + Vitamine C
Booster*

Nr. DA155608-1



NAALDEN
Naaldstift 1,0 mm

Nr. DA300165



HYDRATATIE
hydratatie lichaam
masker

Nr. DA143723-1



REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem

Nr. DA141852



BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+

Nr. DA113200



DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Basis serie

Nr. DA143727

CELLULITE EN WEEFSEL ZWAKTE



SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel

Nr. DA161206



PELLEN
enzymatisch
Behandelingsscrub

Nr. DA143732



SERUM
cellulitis omkering

Nr. DA155610-1



NAALDEN
Naaldstift 1,5 mm

Nr. DA300165



HYDRATATIE
hydratatie lichaam
masker

Nr. DA143723-1



REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem

Nr. DA141852



BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+

Nr. DA113200



DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Cellulitis serie

Nr. DA143728

6.4 PRODUCTSELECTIE LICHAAMSBEHANDELING .

PIGMENTELE EN LEEFTIJDSMARKTEN



SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel

Nr. DA161206



PELLEN
enzymatisch
Behandelingscrub

Nr. DA143732



SERUM
huidskleur
Imperfectiecontrole

Nr. DA155606-1



NAALDEN
Naaldstift 0,5 mm

Nr. DA300165



HYDRATATIE
hydratatie lichaam
masker

Nr. DA143723-1



REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem

Nr. DA141852



BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+

Nr. DA113200



DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Huidskleur serie

Nr. DA143730

LOKALE VETPADS



SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel

Nr. DA161206



PELLEN
enzymatisch
Behandelingscrub

Nr. DA143732



SERUM
lipolyse
booster

Nr. DA155612-1



NAALDEN
Naaldstift 1,0 mm

Nr. DA300165



HYDRATATIE
hydratatie lichaam
masker

Nr. DA143723-1



REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem

Nr. DA141852



BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+

Nr. DA113200



DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Cellulitis serie

Nr. DA143728

TONING



SCHOONMAAK
behandelingen
reinigingsmiddel

Nr. DA161206



PELLEN
enzymatisch
Behandelingscrub

Nr. DA143732



SERUM
Hyaluronzuur booster

Nr. DA180051-3



NAALDEN
Naaldstift 1,0 mm

Nr. DA300165



HYDRATATIE
hydratatie lichaam
masker

Nr. DA143723-1



REPARATIE
na de behandeling
Reparatie balsem

Nr. DA141852



BESCHERMEN
UV-bescherming
Crème SPF 50+

Nr. DA113200



DAGELIJKSE ZORG
Dagelijkse behandeling zorg
Cellulitis serie

Nr. DA143728

6.5 PRODUCTSELECTIE SPECIALE TOEPASSINGSGEBIEDEN.

ACNE & VETTE HUD

							
SCHOONMAAK Behanding Zuiverend reinigingsmiddel	PELLEN enzymatisch Behandingsscrub	SERUM Acne en vette huid omkering	NAALDEN naaldpen 0,25 mm - 1,0 mm	HYDRATATIE Hydratatie gezichtsmasker	REPARATIE na de behandeling Reparatie balsem	BESCHERMEN UV-bescherming Crème SPF 50+	DAGELIJKSE ZORG Dagelijkse behandeling zorg Vette huid serie
Nr. DA143725	Nr. DA143732	Nr. DA155609-1	Nr. DA300165	Nr. DA143722-1	Nr. DA141852	Nr. DA113200	Nr. DA143729

HAARGROEI

				
SCHOONMAAK kami hoofdhuid shampoo	PELLEN kami hoofdhuid scrub	SERUM Haargroei booster	NAALDEN naaldpen 0.25mm-0.5mm	DAGELIJKSE ZORG Dagelijkse behandeling zorg Basis serie
Nr. DA180061	Nr. DA180060	Nr. DA155611-1	Nr. DA300165	Nr. DA143727

Onze tip.

Gebruik de haargroei

Booster serum na het reinigen en desinfecteren van de hoofdhuid.

Wij adviseren een combinatiebehandeling met 0,25 mm en 0,5 mm.

Bijvoorbeeld:

maandag = 0,25 mm, woensdag = 0,25 mm, vrijdag = 0,5 mm.

LIP

		
SERUM lipversterker	NAALDEN naaldpen 0,25 mm - 0,5 mm of nano	DAGELIJKSE ZORG lip verzorging prestatie balsem
Nr. DA155615-1	Nr. DA300165	Nr. DA135129

NUTTIGE ACCESSOIRES

	ITEM NR.
Behandeling Huidherstel Thee	DA141722-1
Bladmasker (voor individuele serums)	DA141711
Alcoderm huidontsmettingsmiddel	DA141511
Fijndoseerspuiten (verwijderen van steriele sera)	DA180075
Maskerborstel (voor enzympeeling)	DA141891
Acrylrek voor 24 steriele sera	DA142087
Handstukhouder aluminium	DA310277

6.6 INSTRUCTIES: STAP VOOR STAP.

BEREIDING EN DESINFECTIE.

Zorg ervoor dat u vóór de behandeling de naaldhulpstukken heeft die u wilt en alle producten die u nodig hebt. Houd de werkplek hygiënisch schoon en zorg voor voldoende verlichting. Voordat u de pen gebruikt, dient u de te behandelen huid grondig te reinigen en te desinfecteren met Alcoderm®.

1. ■ SCHOONMAAK.

Verwijder make-up en reinig de te behandelen lichaamsdelen met veel water en de milde Treatment Cleanser. Neem een kleine hoeveelheid Cleanser en meng dit met wat lauwwater.

Nu ontstaat er een zacht en intensief verzorgend schuim. Verdeel dit schuim over het lichaamsdeel. Masseer het zachtjes in en was het daarna grondig af.

2. ■ ENZYM PEELING.

De volgende stap is het verwijderen van dode huidcellen van je huid. Hiervoor wordt de enzymatische peeling met een maskerborstel onverdund op de huid aangebracht. Zorg ervoor dat u het gebied rond de mond en de ogen vermijdt. Laat ongeveer 5-10 minuten intrekken. Daarna met veel water en een spons verwijderen zonder resten achter te laten. Dep zachtjes droog en spuit de huid onverdund in met het Alcoderm® huiddesinfectiemiddel (verblijftijd 30 seconden).

Let op: Vanaf een naaldlengte van 0,75 mm kan het raadzaam zijn om achteraf een verdovende crème te gebruiken (bijv. Emla-crème). Let op de belichtingstijden van de fabrikant.

3. ■ SERUM.

Over het algemeen heeft u twee mogelijkheden om de microneedling-toepassing te combineren met een therapie met actieve ingrediënten (serum). Werk ofwel direct in een steriel serum met de naaldstift of gebruik een nazorgserum na de behandeling. Vanwege de farmaceutische zuiverheid en de hogere effectiviteit raden wij het gebruik van een steriele ampul met werkzame stof aan. U neemt het serum in met de meegeleverde fijndoseerspuit. Verwijder hiervoor voorzichtig de witte dop van de ampul. Doorboor het grijze septum met de opvangspuit en trek de spuit open. De canule kan dan eenvoudig worden verwijderd om het serum veilig op de huid te verspreiden. Het serum is zeer effectief en bevat 10 ml. Voor een gezichtsbehandeling heeft u slechts 2 tot 3 ml nodig, meer op het lichaam afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied.

4. ■ NAALDPEN.

Bepaal of u de behandeling op netstroom of draadloos wilt uitvoeren. Bevestig de gewenste naaldbevestiging op het apparaat en zorg ervoor dat deze goed vastzit en niet beschadigd is. Zet de naaldpen in gebruik met de AAN/UIT-knop. De gewenste naaldlengte kan alleen worden ingesteld als het apparaat is ingeschakeld.

Trek nu met twee vingers het huidgebied dat u wilt behandelen aan. Schuif de pen in het gewenste patroon over de huid.

Zorg ervoor dat u elk deel van de huid 5 tot 8 keer naalden.

Belangrijke opmerking: Tijdens de behandeling mag een naaldpen nooit ondersteboven worden gehouden (naaldkop wijst naar boven). Vloeistof in de naaldkop zou in de motorruimte kunnen lopen en onherstelbare schade kunnen veroorzaken (vloeistofterugstroming).

5. ■ HYDRATATIE.

Na de behandeling zijn uw huidkanalen ongeveer 15 minuten open en zijn ze bijzonder ontvankelijk voor zeer effectieve maskers. Verwijder de DER MIDA®

Hydratatiemasker van de verpakking. Verwijder indien aanwezig de twee beschermfolies en plaats het masker op het behandelde deel van het lichaam. Ontspan nu 10 tot 15 minuten en laat het masker zijn werk doen. Verwijder vervolgens het masker en masseer zachtjes het overtollige serum in.

6. ■ REPARATIE.

Microneedling belast uw huid. Gevoelige en gevoelige huidtypes gebruiken nu de DERMIDA® Post Treatment Repair Balm. Dit is een intensief hydraterende en anti-irriterende verzorgende balsem voor direct gebruik na het naalden. De Repair Balm is hygiënisch verpakt in individuele sachets. Scheur het sachet open en verdeel de balsem met cirkelvormige bewegingen over de huid. Laat het volledig intrekken.

7. ■ BESCHERMEN.

Microneedling is perfect op elk moment van het jaar. Als het behandelde lichaamsdeel wordt blootgesteld aan de zon, is speciale UV-bescherming met een hoge zonbeschermingsfactor vereist. Verwijder hiervoor de dunne en zeer snel intrekende zonbeschermingscrème DERMIDA® UV Protect

Crème SPF 50+ en breng aan op het behandelde gebied.

8e. ■ DAGELIJKSE ZORG.

Raak uw huid de komende twee uur niet met uw hand aan. Vermijd hevig zweten, stoombaden en direct zonlicht op de dag van de behandeling. Draag geen make-up.

Slaap is nu de beste rust van je huid. Indien nodig dient u van tevoren uw kussensloop te verwisselen. In de dagen die volgen tussen de behandelingen kunt u uw behandelresultaten verder verbeteren met de speciale dagverzorgingscrèmes van DERMIDA®.

7. REINIGING EN ONDERHOUD.

AANDACHT!

Gevaar voor kortsluiting. Er bestaat een risico op schade aan elektronische componenten als componenten van de MEDICAL CONTROL-naaldpen worden gedemonteerd en gereinigd terwijl ze nog elektrisch zijn aangesloten.

- Schakel vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden de stroomtoevoer uit.

AANDACHT!

Schade door vloeistoffen. Als reinigingsmiddelen of desinfectiemiddelen in het handstuk, de bedieningseenheid of de voeding komen, kan er kortsluiting optreden.

Het kan ook elektrische of mechanische componenten aantasten.

- Plaats het handstuk, de bedieningseenheid of de voeding nooit in een reinigings- of Dompel ontsmettingsmiddel in.
- Plaats het handstuk, de bedieningseenheid of de voeding nooit in een autoclaaf of in een autoclaaf Schoon ultrasoon bad.
- Materiaalcompatibiliteit bij het kiezen van reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen beschouwen.

7.1 INSPECTIE

De keuringen mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde dealers. Wij raden aan om de NeedlingPen MEDICAL CONTROL met regelmatige tussenpozen van 24 maanden af te geven aan een vakhandelaar voor controle volgens de specificaties van de fabrikant. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij uw vakhandelaar of via info@dermida.de contact.

7.2 CONTRACTUELE MATERIALEN

Gebruik voor het reinigen van de MEDICAL CONTROL-naaldpen een mild reinigingsmiddel op zeepbasis en een desinfectiemiddel dat in het betreffende land is goedgekeurd. Aan de hand van onderstaande materiaalcompatibiliteit kunt u beoordelen welke reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen het meest geschikt zijn.

De oppervlakken van de NeedlingPen MEDICAL CONTROL zijn bestand tegen:

- lichte zuren (dwz boorzuur ȳ 10%, azijnzuur ȳ 10%, citroenzuur ȳ 10%)
- alifatische koolwaterstoffen (bijv. pentaan, hexaan)
- Ethanol
- de meeste anorganische zouten en hun waterige oplossingen (bijv. natriumchloride, calciumchloride, magnesiumsulfaat)

De oppervlakken van de NeedlingPen MEDICAL CONTROL zijn niet bestand tegen:

- sterke zuren
(bijv. zoutzuur ȳ 20%, zwavelzuur ȳ 50%, salpeterzuur ȳ 15%)
- oxiderende zuren (bijv. perazijnzuren)
- alkalische oplossingen
(dwz bijtende soda, ammoniak en alle verbindingen met pH > 7)
- aromatische/gehalogeneerde koolwaterstoffen (bijv. fenol, chloroform)
- Aceton en benzine

7.3 DESINFECTIE VAN OPPERVLAKKEN

Voor en na elk gebruik:

- De handstukkabel, het handstuk en de handstukrest van de geïnfecteerd zoals beschreven in [paragraaf "7.5 Reinigen en desinfecteren van het apparaat"](#).

7.4 REINIGING VAN DE OPPERVLAKKEN

Externe reiniging:

- De NeedlingPen MEDICAL CONTROL en zijn accessoires met één zachte doek gedrenkt in een reinigings-/desinfectieoplossing.

7.5 REINIGING EN DESINFECTIE VAN HET APPARAAT

AANDACHT!

Schade door vloeistoffen. Als reinigingsmiddelen of desinfectiemiddelen in het handstuk, de bedieningseenheid of de voeding komen, kan er kortsluiting optreden.

Het kan ook elektrische en mechanische componenten aantasten.

- Plaats het handstuk, de bedieningseenheid of de voeding nooit in een reinigings- of Dompel ontsmettingsmiddel in.
- Plaats het handstuk, de bedieningseenheid of de voeding nooit in een autoclaaf of in een autoclaaf Schoon ultrasoon bad.
- Materiaalcompatibiliteit bij het kiezen van reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen controleren.

8. TRANSPORT- EN OPSLAGVOORWAARDEN.

8.1 HANDSTUK, BATTERIJLADER

AANDACHT!

Schade door vallen. Als het handstuk valt, kan het beschadigd raken.

- Plaats het handstuk altijd op een vlakke, stabiele ondergrond zodat het niet kan vallen.
- Plaats het handstuk na elk gebruik terug in de houder om het veilig te bewaren.
- Als het handstuk is gevallen, moet u de onderdelen visueel inspecteren.
- Breng de regeleenheid of het handstuk naar een erkende dealer als:
Componenten zijn zichtbaar bezet of werken niet meer normaal.
- De NeedlingPen MEDICAL CONTROL en zijn accessoires alleen in de originele verpakking vervoer.

Bewaar de NeedlingPen MEDICAL CONTROL en de accessoires altijd onder de volgende omstandigheden:

apparaat	MEDISCHE CONTROLE naaldpen
omgevingstemperatuur	-10°C tot +40°C
Relatieve vochtigheid	10% tot 90%
luchtdruk	540hPa tot 1070hPa

8.2 NAALDMODULES

Bewaar de steriele naaldmodules altijd onder de volgende omstandigheden:

apparaat	MEDISCHE CONTROLE naaldpen
omgevingstemperatuur	-15°C tot +25°C
Relatieve vochtigheid	30% tot 65%

9. OPLEIDING.

9.1 MEDISCHE MICRONEEDLING

Het is de verantwoordelijkheid van het leverende bedrijf (of wie dan ook namens hen) om adequate training te geven om te leren wat in deze handleiding wordt beschreven en om ervoor te zorgen dat de behandeling correct wordt uitgevoerd. Het wordt echter ten zeerste aanbevolen om vooraf bij de lokale gezondheidsautoriteiten na te gaan of u verplicht bent om aanbevolen of verplichte trainingen te volgen volgens de voorschriften van verschillende landen.

9.2 ESTHETISCH MICRODERMABRASIE

Het is de verantwoordelijkheid van het leverende bedrijf (of wie dan ook namens hen) om adequate training te geven om te leren wat in deze handleiding wordt beschreven en om ervoor te zorgen dat de behandeling correct wordt uitgevoerd. Hiervoor zal een opleidingsevenement plaatsvinden met hooggekwalificeerd personeel.

10. BURGERLIJKE VERPLICHTING.

AANSPRAKELIJKHEID

YOYU BRANDS GmbH is niet aansprakelijk voor veiligheid, betrouwbaarheid en Prestaties van de NeedlingPen MEDISCHE CONTROLE als:

- Geen training van de fabrikant of een geautoriseerde dealer is uitgevoerd.
- de elektrische installatie van de ruimte waarin de NeedlingPen MEDICAL CONTROL is geïnstalleerd, voldoet niet aan de toepasselijke wetten, nationale veiligheidsvoorschriften en Europese normen.
- het apparaat voldoet niet aan de eisen in deze handleiding
Er wordt gebruik gemaakt van instructies, aanbevelingen en waarschuwingen.

YOYU BRANDS GmbH wijst elke aansprakelijkheid af voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door ongeoorloofde manipulatie van het apparaat, ontbrekend of onvoldoende onderhoud en niet-naleving van de voorschriften in deze handleiding.

11. GARANTIE.

TWAALF MAANDEN GARANTIE



Het apparaat heeft een garantie van twaalf maanden tegen defecten in materialen en montage af fabriek.

Niet onder de garantie vallen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door normaal gebruik en onderdelen die defect zijn geraakt door verkeerd gebruik of slecht onderhoud.

12. VOORWAARDEN DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN.

- Reparaties als gevolg van natuurrampen, mechanische schokken, storingen in het elektrisch systeem, verwaarlozing, verkeerd gebruik of misbruik van het apparaat, service of reparaties onder Gebruik van materialen en/of door niet door YOYU BRANDS GmbH geautoriseerde personen.
- Elke gebruiksomstandigheid die niet door de fabrikant is voorzien.
- De reparaties worden uitgevoerd in onze fabriek of in gespecialiseerde werkplaatsen. De NeedlingPen MEDICAL CONTROL moet vooraf worden verzonden goedgekeurd zijn door YOYU BRANDS GmbH. De transportkosten de klant moet dragen.
- YOYU BRANDS GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of storingen van de dienst, die te wijten zijn aan omstandigheden die niet vertegenwoordigd.
- De klant kan in geen geval vergoeding eisen voor schade veroorzaakt door: leed aan het falen van het apparaat.
- Neem voor meer informatie contact op met kontakt@prpmed.de

AANDACHT!

Het apparaat kan defect raken of stoppen als het niet regelmatig wordt onderhouden door YOYU GmbH of een erkend servicecentrum. Neem ongeveer elke 24 maanden na gebruik en slijtage van de interne onderdelen contact op met een servicecentrum.

13. INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT.



De NeedlingPen MEDICAL CONTROL die u hebt gekocht, vereist het gebruik van speciale materialen en stoffen bij de vervaardiging ervan. Het kan ook gevaarlijke stoffen bevatten die, als ze niet op de juiste manier in het milieu terechtkomen, een impact kunnen hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

Om het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het milieu te voorkomen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen, moet de fabrikant het hergebruik, de terugwinning en de recycling van de materialen in het apparaat vergemakkelijken wanneer de gebruiker van plan is het apparaat weg te gooien. Overheden nemen passende maatregelen zodat gebruikers, distributeurs en fabrikanten bijdragen aan de inzameling van AEEA en hen verplichten deze te hergebruiken of te recyclen. Houd er bij het afvoeren van het apparaat rekening mee dat er speciale nationale wettelijke voorschriften van toepassing zijn:

- Gooi het apparaat niet weg bij het gemeentelijk afval, maar verzamel het apart. Neem hiervoor contact op met een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwijdering van oude elektrische/elektronische apparaten, zoals de NeedlingPen MEDICAL CONTROL, of met de plaatselijke afvaldienst.
- Houd rekening met de mogelijke schadelijke effecten op de milieu en de menselijke gezondheid die mogelijk in gevaarlijke stoffen aanwezig in elektrische en elektronische apparaten of oneigenlijk gebruik van de apparaten of hun onderdelen zijn verschuldigd. Het apparaat waarnaar deze handleiding verwijst bestaat uit mechanische onderdelen van metaal en kunststof en elektrische onderdelen. De fabrikant staat achter de gebruikers op verzoek beschikbaar om informatie te verstrekken over de apparaten in de apparaten gevaarlijke stoffen bevat en hun terugwinning en hergebruik of over de mogelijkheden om het oude apparaat opnieuw te gebruiken.

prpmed.de

prpmed.de Funkner e. K
Kurstrae 7,
63667 Bad Salzhausen

kontakt@prpmed.de
<https://prpmed.de>