



D E R M I D A

**CONTROL MEDICAL PEN
NEEDLING**

**MANUAL DE UTILIZARE ȘI
ÎNTREȚINERE**



/ CUPRINS.

1. Introducere și informații despre acest manual	4	6. Terapie cu sistem [MatrixNeedling®] .	20
2. Instrucțiuni importante de siguranță	6	6.1 Capul acului și nivelurile de viteză	22
2.2. Instrucțiuni de siguranță specifice produsului	6	6.2 Domenii de aplicare	23
2.3. Precauții importante pentru protecția sănătății și siguranța	7	6.3 Selectarea produsului tratament facial	32
2.4 Contraindicații și efecte secundare	---	6.4 Selectarea produsului tratament corporal	38
2.4.1 Contraindicații pentru Microneedling și microdermabrazie	---	6.5 Selectarea produsului Domenii speciale de aplicare	42
2.5 Calificările utilizatorului sunt necesare	9	6.6 Instrucțiuni: pas cu pas	44
2.6 Utilizare prevăzută, Aplicație gamă și utilizare corectă	9	7. Curățare și întreținere	46
2.6.1 Utilizarea prevăzută	9	7.1 Inspecție	46
2.6.2 Domeniul de aplicare	9	7.2 Materiale compatibile	46
2.6.3 Utilizare adecvată	10	7.3 Dezinfectarea suprafețelor	47
2.7 Simboluri de pe Produs	10	7.4 Curățarea și dezinfectarea dispozitivului	47
3. Domeniul de livrare	11	8. Condiții de transport și depozitare	48
4. Informații despre dispozitiv	11	8.1 Piesă de mână, încărcător de baterie	48
4.1 Specificații	11	8.2 Module cu ac	48
4.2 Condiții de funcționare	12	9. Antrenament	49
4.3 Accesorii și piese de schimb	12	9.1 Microneedling medical	49
5. Punere în funcțiune și utilizare	13	9.2 Microdermabrazie estetică	49
5.1 Modul wireless	14	10. Obligație civilă	49
5.2 Modul cu fir	14	11. Garanție	50
5.3 Modul de încărcare	14	12. Condiții neacoperite de garanție	50
5.4 Pornire și oprire: ON și OFF	15	13. Note privind eliminarea dispozitivului	51
5.5 Setarea frecvenței de stimulare și viteza	16		
5.6 Atașarea capacului de protecție piesa de mână și cablu	17		
5.7 Introducerea sau înlocuirea modulelor nodului	17		
5.8 Reglarea adâncimii modului ac	18		

1. INTRODUCERE ȘI INFORMAȚII DESPRE ACEST MANUAL.

/ DRAGĂ CLIENT,
DRAGĂ CLIENT,

Vă mulțumim pentru achiziționarea DERMIDA® MEDICAL CONTROL și pentru încrederea pe care o acordați în noi.

Dispozitivul pe care l-ați achiziționat vă permite să lucrați în două moduri: în modul wireless datorită bateriei cu litiu încorporată sau în modul alimentat cu un cablu.

CONTROLUL MEDICAL poate fi echipat cu diverse accesorii (cartușe cu ace) sunt utilizate pentru a efectua următoarele tratamente:

- Microneedling medical
- Microdermabraziune

Microneedlingul medical se efectuează folosind piesa de mână la care este atașat un modul de ac steril, de unică folosință. Acest modul de ac este format din aplicatoare mici, ascuțite (lungime maximă 2,5 mm) care provoacă micro-perforarea pielii și, prin stimularea epidermei și a dermei, asigură o reînnoire mecanică puternică a pielii (inducerea colagenului). După aceea, pielea devine mai strălucitoare și mai fermă.

Microdermabraziunea se realizează folosind piesa de mână la care este atașat un cartus steril de unică folosință. Este format din 130 de micro-aplicatoare mici, ascuțite (lungime maximă 0,1 mm) care creează un efect de peeling omogen pentru a stimula reînnoirea pielii și curățarea profundă, îndepărtând celulele moarte ale pielii.

ATENȚIE!

Procesul corect de tratare și aplicarea acestuia sunt garantate numai atunci când se utilizează accesorii originale certificate.

Nu utilizați produse nespecifice și netestate (creme, emulsii, geluri, seruri, pigmenți) deoarece acestea pot provoca efecte secundare și/sau deteriorarea accesoriului

INTRODUCERE ȘI INFORMAȚII DESPRE ASTA MANUAL

Aceste instrucțiuni de utilizare tratează tehnologia și gama de funcții ale NeedlingPen MEDICAL CONTROL și accesoriiile specifice ale acestuia. Conține informații importante pentru instalarea în siguranță, funcționarea și îngrijirea în siguranță a dispozitivului și pentru utilizarea prevăzută. Acest manual este limitat la toate informațiile esențiale pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului.

2. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.

2.1 INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție și complet aceste instrucțiuni de utilizare.
- Acest manual este unul pentru toate persoanele care folosesc
Utilizați, curățați, dezinfectați și depozitați NeedlingPen MEDICAL CONTROL sau transport, depozitați într-un loc accesibil.
- Predați aceste instrucțiuni de utilizare cu fiecare transfer de proprietate asupra NeedlingPen MEDICAL CONTROL.
- Respectați regulile de siguranță. Păstrați locul de muncă curat din punct de vedere igienic și asigura o iluminare adecvată.
- Folosiți NeedlingPen MEDICAL CONTROL numai dacă dispozitivul este accesoriile și toate cablurile piesei de mână sunt în stare bună.
- Folosiți numai accesorii și piese de schimb originale.

2.2 OBSERVAȚII DE SIGURANȚĂ SPECIFICE PRODUSULUI

- Nu modificați niciodată accesorii NeedlingPen MEDICAL, modulele ac sau altceva CONTROL.
- Nu utilizați curent de 220 V AC deoarece poate provoca incendiu sau defectiuni.
- Copiii trebuie supravegheați și nu au voie să folosească acul
Joacă Pen MEDICAL CONTROL.
- Asigurați-vă că nu pătrund lichide în piesa de mână sau în sursa de alimentare pătrundere.
- Evitați sursele de interferență prin apropierea NeedlingPen MEDICAL CONTROL nu sunt folosite dispozitive mobile.
- Piesa de mână în timpul utilizării de către un capac al piesei de mână protecie
- Dacă NeedlingPen MEDICAL CONTROL nu este utilizat sau complet încărcat, deconectați-l de la sursa de alimentare și depozitați-l în suportul piesei de mână pentru a preveni rostogolirea sau căderea dispozitivului.
- Datele tehnice prezentate în acest manual respectați și respectați condițiile de exploatare, transport și depozitare
- CONTROLUL MEDICAL NeedlingPen pentru verificarea la a Trimiteti distribuitorului dumneavoastra dacă este deteriorat, dacă nu funcționează normal sau dacă lichid a intrat în dispozitiv sau în piesa de mână.
- Vă recomandăm să utilizați de regulă NeedlingPen MEDICAL CONTROL să fie trimis la un dealer autorizat pentru inspecție la intervale moderate de 24 de luni.

3. PRECAUȚII IMPORTANTE PENTRU 2 SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

- Microdermabraziunea necesită precauții speciale pentru Sănătate și siguranță care sunt incluse în listă. Microneedlingul medical necesită precauții speciale de sănătate și siguranță, așa cum se indică în listă și trebuie efectuate numai de o persoană instruită corespunzător, conform reglementărilor și legilor în vigoare în diferite țări.
- Urmați toți pașii pentru a dezinfecta dispozitivul înainte de tratament.
 - Purtați mănuși de unică folosință din nitril sau latex, mască de protecție a ochilor și buzelor, șapcă și halat de unică folosință înainte de a începe tratamentul și în timpul tuturor operațiilor.
 - Zona de piele a pacientului înainte de tratament cu curățați cu un detergent ușor și dezinfectant. Puteți obține rezultate ideale cu procedura de tratament cu sistemul de ace matrice.
 - Utilizați numai preparate topice și sterile pentru tratament acest tip de aplicații au fost testate.
 - Utilizați un nou modul de ac în ambalaj steril pentru fiecare client. Înainte de tratament, verificați dacă ambalajul nu este deteriorat și că data de expirare nu a depășit. Numărul de lot al modulelor de ac utilizate notați cardul de client relevant pentru a evita orice probleme să raporteze producătorii.
 - Modulele de ac sunt produse sterile de unică folosință (consumabile) și poate fi folosit o singură dată.
 - Cartușele uzate sau defecte și ambalajul acestora este deteriorat, într-un recipient special conform reglementărilor din țara dumneavoastră eliminați în conformitate cu reglementările aplicabile.
 - Asigurați-vă că modulele acului nu sunt niciodată în contact cu obiecte contaminate, cum ar fi de ex. B. îmbrăcămintea întră în contact. Modulele de ac contaminate nu trebuie utilizate și trebuie eliminate imediat
 - În timpul utilizării, piesa de mână trebuie acoperită complet cu a folie de protecție sunt acoperite. Piesa de mână trebuie să fie înainte de a fi pusă ale modulelor acului sunt acoperite cu o folie de protecție.
 - Piesa de mână periodic pentru contaminare vizibilă Verifica.
 - Țineți întotdeauna ferm piesa de mână înainte de a o porni sau de a o așeza pe raft. Dacă o piesă de mână neasigurată este pornită, aceasta se poate mișca din cauza vibrațiilor și poate provoca răni.
 - Asigurați-vă că indicați clientului că contactul de evitat cu pielea proaspăt tratată. Zonele de piele proaspăt tratate trebuie protejate de contaminare și radiații UV.
 - Alte situații iritante precum vizitele la piscină și la saună, peelingul ablativ sau chimic și depilarea
 - Petele trebuie evitate în primele două până la trei zile după tratament.

2.4 CONTRAINDICAȚII ȘI EFECTE ADVERSE

Dacă persoana responsabilă de tratament are cea mai mică îndoială că siguranța pacientului care este tratat nu este garantată, de ex. B. din cauza bolii sau a unor afecțiuni secundare tratamentul trebuie întrerupt sau suspendat imediat.

2 . 4 . 1 CONTRAINDICAȚII FORMICRONEEDLINGȘI MICRODERMABRAZIUNE:

- Persoane care suferă de alergii, epilepsie, infecții sau autoimune boli, infecții ale tractului respirator, ale sistemului cardiovascular sau ale zonei pielii de tratat.
- Persoane care suferă de boli sau tratate cu medicamente care modifică reepitelizarea normală a pielii (de exemplu, diabet, anemie mediteraneană etc.) sau care urmează chimioterapie.
- Orice formă de acnee activă în zona de tratat.
- Dacă tratamentul este combinat cu alt aspect estetic tratamente medicale care compromit grosimea si integritatea epidermei.
- Răni deschise, eczeme sau erupții cutanate în zona de tratat Zonă.
- Pentru a trata persoanele cu edem vizibil și vânătăi în zona.
- Infecții sistemice și boli virale (de exemplu, hepatită A, B, C, D, E sau F, infecție cu HIV) sau infecții locale acute ale pielii (de exemplu, herpes, rozacee).
- În timpul chimioterapiei, radioterapiei sau a dozelor mari terapie cu corticosteroizi
- Sarcina și alăptarea
- Persoane cu vârsta sub 18 ani fără acordul părinților sau tutorelui.

2.4.2 REACȚII ADVERSE

În unele cazuri, pot apărea reacții adverse ușoare în timpul și după tratament. Aceste reacții adverse sunt enumerate mai jos.

- Disconfort în prima zi de tratament • Iritarea pielii (cum ar fi mâncărime sau senzație de căldură în zona tratată), care apare de obicei în primele 12 până la 72 de ore după tratament dispărea
- Exfoliere ușoară, temporară a pielii, care se rezolvă de obicei în opt zile

2 . 5 CALIFICARI NECESARE DE UTILIZATOR

NeedlingPen MEDICAL CONTROL și accesoriile sale nu pot fi utilizate de către persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de către copii. Dispozitivul și accesoriile sale nu trebuie utilizate de persoane fără experiență sau cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite.

NeedlingPen MEDICAL CONTROL poate fi utilizat numai de personal care îndeplinește următoarele cerințe:

- Instruire adecvată din partea producătorului sau distribuitorului acestuia sau a altui organism competent, atât în ceea ce privește aspectele de siguranță (așa cum sunt indicate în instrucțiunile de utilizare), cât și aspectele tehnice, igienice și estetice ale tratamentelor.
- Cunoștințe de bază despre microneedling medical și microdermabraziune • Cunoașterea regulilor de igienă și siguranță • Cunoașterea riscurilor și efectelor secundare

2.6 UTILIZARE PREVONTATĂ, PENTRU - DOMENIUL DE APLICARE ȘI UTILIZARE CORECTĂ

2.6.1 UTILIZARE PREVONTATĂ

NeedlingPen MEDICAL CONTROL vă permite să lucrați cu diferite Accesorii (cartușe cu ace) pentru efectuarea următoarelor tratamente:

- Pentru microneedling medical: Modulul de ac steril de unică folosință, format din aplicatoare ascuțite (lungime maximă 2,5 mm), a fost special pentru tratamentul medical al pielii sănătoase în scopul de dezvoltat pentru întinerirea pielii. Cu microneedling, straturile de suprafață ale pielii sunt stimulate și pot apărea microleziuni în timpul procesului mecanic. După aceea, pielea are nevoie de o pauză în care să facă schimb de celule și să se regenereze.
- Pentru microdermabraziune: cartuș e speciale de ace sterile de unică folosință cu micro-aplicatoare speciale, ascuțite (lungime maximă 0,1 mm) care creează un efect de peeling omogen pentru Stimulează reînnoirea pielii și curățarea profundă și îndepărtează celulele moarte ale pielii.

2.6.2 DOMENIU DE APLICARE

- Aplicații pentru microneedling medical:
- Tratamentul liniilor/ridurilor pentru întinerirea pielii • Îmbunătățirea fiziologică a activității pielii prin stimulare epiderma
 - Tratamentul cicatricilor, acneei și vergeturilor
 - Hiperpigmentare

- Aplicații pentru microdermabraziune:
- Tratament pentru corectarea estetică a imperfecțiunilor feței si pe corp

2. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.

2.6.3 UTILIZARE CORECTĂ

Toate tratamentele efectuate cu NeedlingPen MEDICAL CONTROL (microneedling medical și microdermabraziune) trebuie să aibă loc într-o cameră uscată, curată, fără fum, în condiții de igienă perfecte. NeedlingPen MEDICAL CONTROL trebuie pregătit, utilizat și îngrijit așa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare. În special, trebuie îndeplinite cerințele aplicabile pentru proiectarea locurilor de muncă și materialele care trebuie utilizate.

Utilizarea corectă înseamnă, de asemenea, că acest manual, în special secțiunea „2.2 Instrucțiuni de siguranță specifice produsului”, a fost citit și înțeles în întregime.

Utilizarea corectă necesită doar următoarele grupuri de pacienți:

- Bărbați și femele adulți sănătoși

Utilizarea necorespunzătoare are loc atunci când NeedlingPen MEDICAL CONTROL sau accesoriile sale sunt utilizate în alt mod decât cel descris în aceste instrucțiuni de utilizare sau când nu sunt respectate condițiile de funcționare. Tratamentul este interzis, mai ales în cazul contraindicațiilor (vezi paragraful „2.4 Contraindicații”)

2.7 SIMBOLULE PE PRODUS

Simbolurile descrise mai jos pot fi găsite în aceste instrucțiuni de utilizare, pe NeedlingPen MEDICAL CONTROL și accesoriile acestuia sau pe ambalaj:

simboluri	sens
	Pericol!
	CONTROLUL MEDICAL NeedlingPen corespunde Directivele 2006/42/CE și 2004/108/CE
IP21	Carcasa oferă protecție împotriva prafului grosier și Picătură de apă
IPX6	Carcasa oferă protecție împotriva picăturilor de apă

3. DOMENIU DE LIVRARE.

/ SCOPUL LIVRĂRII

- 1x piesă de mână
- 1x cablu pentru piesa de mână
- 1x încărcător de baterie
- 1x tavă pentru piese de mână
- 1x manual de utilizare și întreținere
- 2x module de ace
- Capacele de protecție ale piesei de mână necesare pentru tratamente nu sunt incluse în pachetul de livrare. Accesoriile adecvate pentru piesa de mână pot fi solicitate de la dealerii autorizați sau de la magazinul nostru online, vezi „4.3 Accesorii și piese de schimb”.

4. INFORMAȚII DISPOZITIV.

4.1 SPECIFICAȚII TEHNICE

dispozitiv	CONTROL MEDICAL stilou stilou
tensiune nominală	5VDC
consumul de energie	1w
model de baterie	Cod model: 13/00294-00
clasa de protecție	2
oscilație de frecvență	Viteza 1: 108 impulsuri/sec Viteza 2: 111 impulsuri/sec Viteza 3: 115 impulsuri/sec Viteza 4: 119 impulsuri/sec Viteza 5: 121 impulsuri/sec Viteza 6: 126 impulsuri/sec
motor	Motor de precizie DC
mod de operare	Fără fir
Dimensiunea produsului (L x l x H)	185 mm x 170 mm x 72 mm
Greutatea piesei de mână	80 g
greutate totală	600 g

4. INFORMAȚII DISPOZITIV.

4.2 CONDIȚII DE OPERARE

dispozitiv	CONTROL MEDICAL stilou stilou
temperatura de functionare	+15 °C până la +25 °C
umiditate	30% până la 75%
presiunea aerului	700 hPa până la 1070 hPa

4.3 ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Următoarele accesorii și piese de schimb pot fi obținute numai de la distribuitorii autorizați.

Accesorii	Articol de descriere	cantitate
Module de ac pentru microdermabraziune	130AN	1 bucată în steril Ambalare
Module de ace pentru microneedling medical	9MN 0,18	1 bucată în steril Ambalare

piesa de schimb	Descriere	continuturi	cantitate
Piesa de mână NeedlingPen CONTROL MEDICAL	stilou pentru ac CONTROL MEDICAL	1	1
baterie cu litiu	-	1	1
Cablul piesei de mână	-	1	1
stecher	13/00294-00	1	1
manual de utilizare	-	1	1

5. PUNCARE ȘI UTILIZARE.

NeedlingPen MEDICAL CONTROL poate fi operat în două moduri diferite: în modul wireless fără cablu și în modul cu un cablu de alimentare CA conectat.

BATERIE.

Baterie reincarcabila

PUBLICITATE.

Porniți / afișajul vitezei

BUTON.

Buton de pornire/viteză

CANTĂ DUBLĂ.

Scala dubla de setari de lucru
(sistem PD/DS)

MODULE DE AC.



5. PUNCARE ȘI UTILIZARE.

5.1 MOD FĂRĂ FĂRĂ: COMANDĂ MEDICALĂ CU ACĂ

Aparatul este utilizat prin acționarea bateriei interne, fără conexiune prin cablu.

5.2 MODUL CABLAT:
CONTROL MEDICAL PEN NEEDLING

Dispozitivul este alimentat de la rețea conectându-l la o priză cu cablu

- 1. Conectați sursa de alimentare cu mufa jack
- 2. Conectați adaptorul de alimentare la priză
- 3. Pentru a încărca bateria: Conectați adaptorul de curent alternativ la o priză electrică și conectați-vă la ieșirea sursei de alimentare

5.3 MODUL DE ÎNCĂRCARE



5.4 PORNIREA ȘI OPRITAREA: PORNIRE ȘI OPRIT

ATENȚIE!

Dacă piesa de mână nu este ținută ferm când este pornită, se poate mișca necontrolat din cauza vibrațiilor.

- Țineți ferm piesa de mână înainte de a o porni.



PORNIRE/OPRIRE.

Pornirea și oprirea
Controale medicale

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2-3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul

ATENȚIE!

Atunci când utilizați MEDICAL CONTROL NeedlingPen în modul cu fir, aveți grijă să nu vă împiedicați de cablu. Un cablu gresit poate fi un pericol de împiedicare.

- Asigurați-vă că toate cablurile sunt așezate astfel încât nimeni să nu se împiedice de ele sau de ele poate trage neintenționat.

ATENȚIE!

Pericol de funcționare defectuoasă a stiloului injectorului MEDICAL CONTROL Accesoriile și piesele de schimb neadecvate pot afecta funcționarea și siguranța stiloului injectorului MEDICAL CONTROL. NeedlingPen MEDICAL CONTROL poate fi deteriorat, eșuat sau funcțional defectuos.

- Numai modulele de ac enumerate în [capitolul "4.3 Accesorii și piese de schimb"](#) la pagina 12, Utilizați accesorii și piese de schimb.

5. PUNCARE ȘI UTILIZARE.

5.5 SETAREA FRECVENȚEI ȘI VITEZEI DE STIMULARE

Când NeedlingPen MEDICAL CONTROL este în modul de funcționare, frecvența de stimulare poate fi modificată sau reglată prin apăsarea scurtă a butonului pornit. Dispozitivul poate fi operat la un total de șase viteze diferite. Piesa de mână pornește la viteză mică și trece la viteză mare.



Rata implicită este de 108 stimulări pe secundă. Unitatea de control este resetată automat la această setare implicită de fiecare dată când este pornită. NeedlingPen MEDICAL CONTROL are un interval de frecvență de 108 - 126 (1-6 niveluri de viteză) oscilații pe secundă și poate fi ajustat în șase niveluri.

ATEN IE!

Deteriorări cauzate de condens: Dacă NeedlingPen MEDICAL CONTROL este expus la fluctuații mari de temperatură, de exemplu în timpul transportului, condensul se poate acumula în interior și poate deteriora componentele electronice.

- Asigurați-vă că NeedlingPen MEDICAL CONTROL a atins temperatura camerei înainte de utilizare. Dacă NeedlingPen MEDICAL CONTROL a fost expus la fluctuații de temperatură, cel puțin 3 ore la 10 °C înainte de a-l folosi

așteptați diferența de temperatură.

- NeedlingPen MEDICAL CONTROL numai la o temperatură a camerei între +15 °C și +25 °C.

ATEN IE!

Scăderea funcționalității din cauza interferențelor electromagnetice.

Dispozitive de comunicație HF portabile și mobile: Dispozitivele precum telefoanele mobile sau routerele WLAN pot afecta funcționarea NeedlingPen MEDICAL CONTROL prin emiterea de radiații electromagnetice. Funcționarea în siguranță a NeedlingPen MEDICAL CONTROL nu mai este garantată.

- Evitați sursele de interferență, asigurându-vă că nu este portabil sau mobil
- dispozitivele sunt utilizate în vecinătatea NeedlingPen MEDICAL CONTROL.
- Educați pacienții cu privire la riscul surselor de interferență.


5 . 6 ATAȘAREA CAPACĂ DE PROTECȚIE LA PIESA DE MÂNĂ ȘI LA CABLU

Pentru a proteja piesa de mână și cablul acestuia de contaminare în timpul tratamentului, vă recomandăm să montați pe piesa de mână un capac de cablu de unică folosință cu un diametru de 20-27 mm.

5 . 7 INTRODUCEREA SAU ÎNLOCUIREA MODULELOR DE AC

NOTE IMPORTANTE PENTRU MODULELE DE AC PENTRU MICRONEEDLING SI MICRODERMABRAZIUNE


- Doar module de ace originale pentru microneedling medical și microdermabraziune utilizare care sunt potrivite pentru piesa de mână furnizată.
- Oprți piesa de mână înainte de a înlocui modulele acului.
- Aruncați în mod corespunzător modulul de ac uzat care nu mai este necesar pentru tratamentul curent.
- Modulele de ac sunt livrate în ambalaje sterile. Chiar înainte de asta Scoateți utilizarea din ambalajul steril.
- Așezați întotdeauna piesa de mână pe suportul piesei de mână, astfel încât modulul acului să nu fie se sprijină la suprafață.
- Oprți piesa de mână.
- ine i de baza cartu ului pentru a-l introduce în piesa de mână.

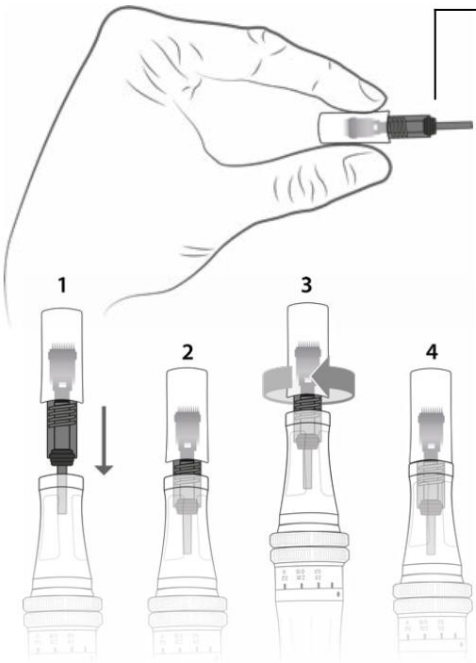

O INȘTIINȚARE.

Cum să prindeți cartu ul cu ac.

- Modulul acului în fir conectorul piesei de mână. Modulul ac poate fi utilizat în toate orientările posibile.
- Rotiți cartușul cu ac în sensul acelor de ceasornic până când simțiți rezistență. Modulul ac este acum la locul lui ferm în piesa de mână.
- Verifica i dacă modulul acului este pozi ionat corect.
- Pentru a scoate modulul acului, rotiți cartușul cu ac în sens invers acelor de ceasornic și în afara piesei de mână lua.

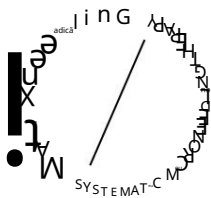

5.8 REGLAREA ADÂNCIUNII MOD ACUL

ATENȚIE!

- Gradul de proeminență (lungimea acului) în funcție de tratament (medical microneedling sau microdermabraziune), indicația și modul de ac corespunzător.
- Gradul de proeminență în funcție de caracteristicile pielii clientului
Alegeți clientul și zona de tratat.

Pentru un control vizual mai bun, este recomandabil să reglați gradul de proeminență cu piesa de mână pornită.

Corpul piesei de mână este echipat cu un sistem de reglare dublă cu tehnologie patentată PD/DS, Performance Deep / Double System, care indică gradul setat de proeminență.

Acest sistem de reglare permite operatorului să lucreze cu precizie, deoarece el știe întotdeauna exact cât de departe iese modulul acului pentru toate tipurile de tratament (microneedling, micropricking și microdermabraziune).

- Porniți piesa de mână.
- Gradul de proeminență prin rotirea părții mobile a
reglați piesa de mână. Folosind scala ca ghid, rotiți până când marcajul este în poziția dorită. Prin

Rotirea în sensul acelor de ceasornic (când se uită la cartuș) mărește gradul de proeminență.

DERMIDA


[MATRIXNEEDLING®]

TERAPIA DE SISTEM

O ÎNȘTIINȚARE.

Cum să reglați gradul de proeminență.

MN MICRODERMABRASION

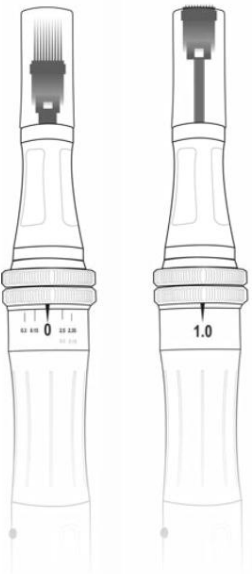

6. APLICARE: [MATRIXNEEDLING ®] TERAPIE DE SISTEM.

/ TRATAMENTUL SISTEMIC AL ZONELOR PROBLEME.

Pentru a efectua sistematic tratamentul medical cu microneedling, mai aveți nevoie de seruri sterile și produse de îngrijire pe lângă dispozitiv.
Ingredientele active special coordonate vă permit să obțineți cele mai bune rezultate din tratament.

8 PASI PENTRU UN REZULTAT PERFECT:



CURĂȚARE

Înainte de microneedling, pielea trebuie îndepărtată minuțios, dar totuși foarte delicat, de celulele moarte ale pielii, de sebum, de machiaj și de impuritățile pielii.
În același timp, bariera pielii și funcția naturală de protecție a pielii pot fi întărite cu demachiante de înaltă calitate. Oferim Tratamentul de curățare (Seria de bază) pentru pielea sensibilă, normală și mixtă și Tratamentul Purifying Cleanser pentru tipurile de ten gras predispus la acnee.

Ingrediente active: ceramide, extract de bambus, alantoina, hamamelis, vitamina E



PEELING

După curățarea de bază, pielea este pregătită optim pentru tratament cu un peeling enzimatic. Acest lucru nu numai că elimină celulele moarte ale pielii, dar stabilește și cursul pentru reînnoirea rapidă a pielii după procedură. Folosim enzime de papaya încapsulate și bromelaină în peelingul nostru cu tratament enzimatic, deoarece ambele ingrediente active s-au dovedit a fi deosebit de blânde.

Ingrediente active: extract de papaya, bromelaina, manitol, vitamina E



SER

În general, aveți două opțiuni pentru a combina aplicarea de microneedling cu o terapie cu substanță activă (ser). Fie lucrați într-un ser steril direct cu stiloul injector, fie folosești un ser de îngrijire după tratament.

Datorită purității farmaceutice și eficacității mai mari, recomandăm utilizarea unei fiole cu ingredient activ steril. Cu 13 seruri mezo sterile, oferim o varietate unică cu care puteți trata în mod specific petele estetice. Pentru o hidratare intensivă, un tratament inițial cu Hyaluron Booster este adesea recomandabil.

Compoziția ingredientelor active variază foarte mult în fiecare domeniu de aplicare.



ACUL

Suntem pionierii în terapia de inducție cu microneedling și collagen în Germania.
Atunci când aceștia cu stiloul electric de acul, un cap de ac este mișcat în sus și în jos, rezultând până la 18.000 de mișcări pe minut cu dispozitive de înaltă performanță. În timpul acestei mișcări în sus și în jos, stiloul cu ac este ghidat peste piele, lăsând mici canale verticale de punctie pe suprafața pielii, așa-numita perforație. Acest proces declanșează o serie de procese biologice care ajută pielea să se „repare” și să se reînnoiască. Un număr mare de probleme ale pielii pot fi tratate eficient în acest fel. Scopul este de la 200 la 250 de perforații pe cm² pentru un rezultat optim.



HIDRATARE

Măștile noastre unice de hidratare sunt disponibile atât pentru tratamente faciale, cât și pentru cele corporale. Acestea asigură hidratarea intensivă a pielii, susțin procesul de regenerare al pielii și stimulează producția proprie de elastină și collagen a organismului. Roșeața, iritația, microlacrimile și uscăciunea sunt reduse imediat. Cu această mască puternică, ești garantat că nu mai ai nevoie de ser după tratament.

Ingrediente active: Matrixyl®, Niacinamidă, Acid Hialuronic, Gatuline Expression AF, iActive-Complex, Prodew 500, Apă de figură



REPARAȚIE

După tratament, este necesar primul ajutor imediat. Balsamul nostru de reparare post-tratament oferă exact asta. Crema întărește bariera pielii slăbită și readuce echilibrul pielii în echilibru. De asemenea, reglează pH-ul pielii. Îngrijire intensivă, reparatoare și constructivă. Pentru o utilizare mai bună, crema este ambalată igienic în plicuri individuale.

Ingrediente active: lizat de ferment Bifida, alantoină, uree, hialuron



PROTEJA

Îți poți proteja pielea bine după tratament prin comportamentul tău personal. Pentru influențele externe - cum ar fi radiațiile UV - aveți UV Protect Cream SPF50+. Este o crema de protecție solară, reparatoare, subțire și foarte rapid absorbită, cu un factor de protecție solară ridicat de 80. Are la baza filtre UVB și UVA dovedite, precum și ingrediente hranitoare pentru stabilizarea pielii.

Ingrediente active: enzime de reparare a ADN-ului, proteine, extract de plancton



ÎNGRIJIREA ZILNICĂ

Profitați mai mult de tratamentul dvs. Cu creme de zi special adaptate obiectivului dumneavoastră de tratament, puteți completa tratamentul în mod optim. Detinem creme de zi pentru tratament pentru anti-imbatranire, celulita, pete pigmentare, cicatrici sau ten gras. Pentru a face acest lucru, utilizați crema ca îngrijire de zi în toate zilele dintre tratamente. Compoziția ingredientelor active variază foarte mult în fiecare domeniu de aplicare.

6.1 CAPUL AC / NIVELELE DE VITEZĂ.

PERICOL:

Utilizați numai accesorii originale DERMIDA® pentru dispozitivul corespunzător.
Capetele de ac ale stiloului cu ace X-tra CONTROL sau SMART CONTROL nu se potrivesc pe MEDICAL CONTROL și invers, deoarece au diferite tehnici de blocare.

NIVELURI DE VITEZA:

Combi-națiile enumerate aici sunt doar valori orientative. Setările reale utilizate pot varia în funcție de preferința medicului sau de tipul de piele.

adâncimea acului	viteză
0,2 mm-0,5 mm	1 la 2
0,5 mm - 1,0 mm	2 la 3
1,0 mm - 1,5 mm	3 la 4
1,5 mm - 1,0 mm	4 la 5
2,0 mm - 2,5 mm	5 la 6

PENITUL CU AC DE CONTROL MEDICAL CAPETE DE AC.

 nr. DA130058-2	Nano Livrare nedureroasă a ingredientelor active fără timp de nefuncționare, Buze, BB Glow, Reînnoire generală a pielii, Nano Peeling, microdermabraziune
 nr. DA130055-2	9s Cicatrici, cicatrici de acnee, vergeturi, celulită, depozite de grăsime locale, riduri adânci, melasma, riduri, pori grosolanți, hiperpigmentare, decolorare a pielii

DERMIDA

[MATRIXNEEDLING®]
DOMENIILE DE APLICARE



6.2 DOMENIILE DE APLICARE.

domenii de aplicare	piele subțire	piele groasa	viteză	ser	note
 ridurile frunții	0,25 mm-0,5 mm	0,5 mm - 0,75 mm	1 - 3	 Argireline + Amplificatori de peptide *	
 linia încruntată	0,25 mm-0,5 mm	0,5 mm - 1,0 mm	1 - 3	 Argireline + Amplificatori de peptide *	
 zona ochilor (picioare, riduri oculare, pungi sub ochi)	0,25 mm	0,25 mm-0,5 mm	1	 Inversarea conturului ochilor	
 nasul și puntea nasului	0,25 mm	0,5 mm	1 - 3	 Booster hialuronic	
 superior pomeții	0,5 mm	0,5 mm - 1,0 mm	1 - 3	 Anti-Aging intens*	

* Tratament inițial, dacă este necesar, pentru hidratare intensivă
efectuați cu Hyaluron Booster.

6.2 DOMENIILE DE APLICARE.

domenii de aplicare	piele subțire	piele groasa	viteză	ser	note
 piesa bucala (colțurile gurii, marionete și pliuri nazolabiale)	0,5 mm - 1,0 mm	1,0 mm - 1,5 mm	2 - 4	 Argireline + Amplificatori de peptide *	
 hiperpigmentare și pete de vârstă	0,5 mm - 0,75 mm	0,75 mm - 1,0 mm	2 - 3	 Imperfecțiunea tonului pielii Control	
 cicatrici și cicatrici de acnee	1,0 mm - 1,25 mm	1,5 mm - 2,0 mm	3 - 5	 Întindere și inversare a cicatricilor	
 Pori mari	0,5 mm	0,5 mm	2	 Retinol + Vitamina C rapel	
 Riduri puternice (In total)	0,75 mm - 1,0 mm	1,0 mm	3 - 4	 Anti-Aging intens*	

* Tratament inițial, dacă este necesar, pentru hidratare intensivă
efectuați cu Hyaluron Booster.

6.2 DOMENIILE DE APLICARE.

domenii de aplicare	piele subțire	piele groasa	viteză	ser	note
 întinderea și Vergeturi	1,5 mm	1,5 mm	4 - 5	 Întindere și inversare a cicatricilor	
 cicatrice	0,75 mm - 1,5 mm	0,75 mm - 1,5 mm	3 - 5	 Întindere și inversare a cicatricilor	
 pete pigmentare	0,5 mm - 0,75 mm	0,75 mm - 1,0 mm	2 - 3	 Imperfecțiunea tonului pielii Control	
 celulita	1,0 mm - 1,5 mm	1,0 mm - 1,5 mm	3 - 5	 inversarea celulitei	
 Tampoane de grăsime locale	1,0 mm - 1,5 mm	1,0 mm - 1,5 mm	3 - 5	 Amplificator de lipoliză	

6.2 DOMENIILE DE APLICARE.

domenii de aplicare	piele subțire	piele groasa	viteză	ser	note
 creșterea parului	0,25 mm-0,5 mm	0,25 mm - 0,75 mm	1 - 3	 Stimulator de creștere a parului	
 buze	0,25 mm-0,5 mm	0,25 mm-0,5 mm	1 - 2	 stimulator de buze	
 piele grasă	0,25 mm - 1,0 mm	0,25 mm - 1,0 mm	1 - 3	 Inversarea acneei si tenului gras	
 BB strălucire	0,25 mm-0,4 mm	0,25 mm-0,4 mm	1 - 2	 Fond de ten DM Cell Brightening*	

* Vă rugăm să rețineți instrucțiunile noastre separate pentru BB Glow.

6.3 SELECTAREA PRODUSELOR DE TRATAMENT FACIAL.

REÎNNOIREA PIELEI ȘI PREVENIREA RIDURILOR

							
CURĂȚARE tratamente demachiant	PEELING enzimatic Scrub de tratament	SER EGF Cell Booster	ACUL Pix pentru ac 0,25 mm	HIDRATARE Masca de hidratare	REPARAȚIE dupa tratament Balsam reparator	PROTEJA Protectie UV Cremă SPF 50+	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria de bază
Nr. DA161206	Nr. DA143732	Nr. DA155601-1	Nr DA300165	nr. DA143722-1	Nr. DA141852	Nr DA113200	Nr. DA143727

RIDURI USOARE LA MEDII

							
CURĂȚARE tratamente demachiant	PEELING enzimatic Scrub de tratament	SER Booster hialuronic	ACUL Pix pentru ac 0,5 mm	HIDRATARE Masca de hidratare	REPARAȚIE dupa tratament Balsam reparator	PROTEJA Protectie UV Cremă SPF 50+	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria de bază
Nr. DA161206	Nr. DA143732	nr. DA180051-3	Nr DA300165	nr. DA143722-1	Nr. DA141852	Nr DA113200	Nr. DA143727

RIDURI PROFUNDE

							
CURĂȚARE tratamente demachiant	PEELING enzimatic Scrub de tratament	SER Anti-Aging intens*	ACUL Pix pentru ac 0,75 mm - 1,0 mm	HIDRATARE Masca de hidratare	REPARAȚIE dupa tratament Balsam reparator	PROTEJA Protectie UV Cremă SPF 50+	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria de bază
Nr. DA161206	Nr. DA143732	Nr. DA155613-1	Nr DA300165	nr. DA143722-1	Nr. DA141852	Nr DA113200	Nr. DA143727

6.3 SELECTAREA PRODUSELOR DE TRATAMENT FACIAL.

RIDURI PE FRENTE

							
CURĂȚARE tratamente demachiant	PEELING enzimatic Scrub de tratament	SER Argireline + Peptide rapel*	ACUL Pix pentru ac 0,75 mm	HIDRATARE Masca de hidratare	REPARAȚIE dupa tratament Balsam reparator	PROTEJA Protectie UV Cremă SPF 50+	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria de bază
Nr. DA161206	Nr. DA143732	Nr. DA155614-1	Nr DA300165	nr. DA143722-1	Nr. DA141852	Nr DA113200	Nr. DA143727

LINII PERIORALE (COLȚUL gurii, MARIONETA ȘI LINII NAZOLABIALE)

	Nu se recomandă peeling.						
CURĂȚARE tratamente demachiant		SER Argireline + Peptide rapel*	ACUL Pix pentru ac 1,0 mm	HIDRATARE Masca de hidratare	REPARAȚIE dupa tratament Balsam reparator	PROTEJA Protectie UV Cremă SPF 50+	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria de bază
Nr. DA161206		Nr. DA155614-1	Nr DA300165	nr. DA143722-1	Nr. DA141852	Nr DA113200	Nr. DA143727

RIDURI PERIORBITALE (RIDURI OCHILOR, PICIOARELE VACII ȘI SACI)

	Nu se recomandă peeling.						
CURĂȚARE tratamente demachiant		SER Conturul ochilor inversare	ACUL Pix pentru ac 0,25 mm	HIDRATARE Masca de hidratare	REPARAȚIE dupa tratament Balsam reparator	PROTEJA Protectie UV Cremă SPF 50+	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria de bază
Nr. DA161206		Nr. DA155607-1	Nr DA300165	nr. DA143722-1	Nr. DA141852	Nr DA113200	Nr. DA143727

6.3 SELECTAREA PRODUSELOR DE TRATAMENT FACIAL.

PORI MARI



CURĂȚARE
tratamente
demachiant

Nr. DA161206



PEELING
enzimatic
Scrub de tratament

Nr. DA143732



SER
Retinol + Vitamina C
rapel

nr. DA155608-1



ACUL
Pix pentru ac 0,5
mm

Nr DA300165



HIDRATARE
Masca de hidratare

nr. DA143722-1



REPARAȚIE
dupa tratament
Balsam reparator

Nr. DA141852



PROTEJA
Protectie UV
Cremă SPF 50+

Nr DA113200



ÎNGRIJIREA ZILNICĂ
Îngrijire zilnică de tratament
Seria de bază

Nr. DA143727

CICATRICE ȘI CICATRICE DE ACNEE



CURĂȚARE
tratamente
demachiant

Nr. DA161206



PEELING
enzimatic
Scrub de tratament

Nr. DA143732



SER
Stretch & Scar
inversare

Nr. DA155605-1



ACUL
Pix pentru ac 1,0
mm

Nr DA300165



HIDRATARE
Masca de hidratare

nr. DA143722-1



REPARAȚIE
dupa tratament
Balsam reparator

Nr. DA141852



PROTEJA
Protectie UV
Cremă SPF 50+

Nr DA113200



ÎNGRIJIREA ZILNICĂ
Îngrijire zilnică de tratament
Seria Stretch & Scar

Nr. DA143731

MARCELE PIGMENTALE SI DE VÂRSTA



CURĂȚARE
tratamente
demachiant

Nr. DA161206



PEELING
enzimatic
Scrub de tratament

Nr. DA143732



SER
tonul pielii
Controlul imperfecțiunilor

Nr. DA155606-1



ACUL
Pix pentru ac 1,0
mm

Nr DA300165



HIDRATARE
Masca de hidratare

nr. DA143722-1



REPARAȚIE
dupa tratament
Balsam reparator

Nr. DA141852



PROTEJA
Protectie UV
Cremă SPF 50+

Nr DA113200



ÎNGRIJIREA ZILNICĂ
Îngrijire zilnică de tratament
Seria Tonuri de piele

Nr. DA143730

6.4 SELECTAREA PRODUSELOR TRATAMENT CORP.

Cicatrici, vergeturi și semne de sarcină

							
CURĂȚARE tratamente demachiant	PEELING enzimatic Scrub de tratament	SER Stretch & Scar inversare	ACUL Pix pentru ac 1,0 mm	HIDRATARE corp de hidratare masca	REPARAȚIE dupa tratament Balsam reparator	PROTEJA Protectie UV Cremă SPF 50+	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria Stretch & Scar
Nr. DA161206	Nr. DA143732	Nr. DA155605-1	Nr DA300165	nr. DA143723-1	Nr. DA141852	Nr DA113200	Nr. DA143731

RIDURI CORPULUI

							
CURĂȚARE tratamente demachiant	PEELING enzimatic Scrub de tratament	SER Retinol + Vitamina C rapel*	ACUL Pix pentru ac 1,0 mm	HIDRATARE corp de hidratare masca	REPARAȚIE dupa tratament Balsam reparator	PROTEJA Protectie UV Cremă SPF 50+	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria de bază
Nr. DA161206	Nr. DA143732	nr. DA155608-1	Nr DA300165	nr. DA143723-1	Nr. DA141852	Nr DA113200	Nr. DA143727

CELULITA ȘI SLABĂCIUNEA ȚESUTURILOR

							
CURĂȚARE tratamente demachiant	PEELING enzimatic Scrub de tratament	SER inversarea celulitei	ACUL Pix pentru ac 1,5 mm	HIDRATARE corp de hidratare masca	REPARAȚIE dupa tratament Balsam reparator	PROTEJA Protectie UV Cremă SPF 50+	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria Celulita
Nr. DA161206	Nr. DA143732	nr. DA155610-1	Nr DA300165	nr. DA143723-1	Nr. DA141852	Nr DA113200	Nr. DA143728

6.4 SELECTAREA PRODUSELOR TRATAMENT CORP.

MARCELE PIGMENTALE SI DE VÂRSTA



CURĂȚARE
tratamente
demachiant

Nr. DA161206



PEELING
enzimatic
Scrub de tratament

Nr. DA143732



SER
tonul pielii
Controlul imperfecțiunilor

Nr. DA155606-1



ACUL
Pix pentru ac 0,5
mm

Nr DA300165



HIDRATARE
corp de hidratare
masca

nr. DA143723-1



REPARAȚIE
dupa tratament
Balsam reparator

Nr. DA141852



PROTEJA
Protectie UV
Cremă SPF 50+

Nr DA113200



ÎNGRIJIREA ZILNICĂ
Îngrijire zilnică de tratament
Seria Tonuri de piele

Nr. DA143730

TAPUNETE DE GRASIM LOCAL



CURĂȚARE
tratamente
demachiant

Nr. DA161206



PEELING
enzimatic
Scrub de tratament

Nr. DA143732



SER
lipoliza
rapel

nr. DA155612-1



ACUL
Pix pentru ac 1,0
mm

Nr DA300165



HIDRATARE
corp de hidratare
masca

nr. DA143723-1



REPARAȚIE
dupa tratament
Balsam reparator

Nr. DA141852



PROTEJA
Protectie UV
Cremă SPF 50+

Nr DA113200



ÎNGRIJIREA ZILNICĂ
Îngrijire zilnică de tratament
Seria Celulita

Nr. DA143728

TONIFICARE



CURĂȚARE
tratamente
demachiant

Nr. DA161206



PEELING
enzimatic
Scrub de tratament

Nr. DA143732



SER
Booster hialuronic

nr. DA180051-3



ACUL
Pix pentru ac 1,0
mm

Nr DA300165



HIDRATARE
corp de hidratare
masca

nr. DA143723-1



REPARAȚIE
dupa tratament
Balsam reparator

Nr. DA141852



PROTEJA
Protectie UV
Cremă SPF 50+

Nr DA113200



ÎNGRIJIREA ZILNICĂ
Îngrijire zilnică de tratament
Seria Celulita

Nr. DA143728

6.5 SELECTAREA PRODUSELOR DOMENIILE SPECIALE DE APLICARE.

ACNEA ȘI PIELE GRASĂ

CURĂȚARE Tratament Purificare demachiant Nr. DA143725	PEELING enzimatic Scrub de tratament Nr. DA143732	SER Acnee și ten gras inversare nr. DA155609-1	ACUL stilou pentru ac 0,25 mm - 1,0 mm Nr DA300165	HIDRATARE Masca de hidratare nr. DA143722-1	REPARAȚIE dupa tratament Balsam reparator Nr. DA141852	PROTEJA Protecție UV Cremă SPF 50+ Nr DA113200	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria ten gras Nr. DA143729

CREȘTEREA PARULUI

CURĂȚARE Kami șampon pentru scalp Nr DA180061	PEELING Kami scrub pentru scalp Nr DA180060	SER Creșterea parului rapel nr. DA155611-1	ACUL stilou pentru ac 0,25 mm-0,5 mm Nr DA300165	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ Îngrijire zilnică de tratament Seria de bază Nr. DA143727

Sfatul nostru.
Utilizați creșterea părului
Booster ser după curățarea și dezinfectarea scalpului.

Vă recomandăm un tratament combinat cu 0,25 mm și 0,5 mm.

De exemplu: luni = 0,25 mm, miercuri = 0,25 mm, vineri = 0,5 mm.

BUZE

SER stimulator de buze Nr. DA155615-1	ACUL stilou pentru ac 0,25 mm - 0,5 mm sau Nano Nr DA300165	ÎNGRIJIREA ZILNICĂ îngrijirea buzelor balsam de performanță Nr. DA135129

ACCESORII UTILE	ARTICOL NR.
Tratament Ceai pentru repararea pielii	DA141722-1
Mască în foaie (pentru seruri individuale)	DA141711
Dezinfectant pentru piele Alcoderm	DA141511
Seringi cu dozare fină (îndepărtarea serurilor sterile)	DA180075
Perie pentru masca (pentru peeling cu enzime)	DA141891
Raft acrilic pentru 24 de seruri sterile	DA142087
Suport piesa de mana din aluminiu	DA310277

6.6 INSTRUCȚIUNI: PAS CU PAS.

PREGATIREA SI DEZINFECTAREA.

Înainte de tratament, asigurați-vă că aveți atașamentele pentru ace dorite și toate produsele de care aveți nevoie. Păstrați locul de muncă curat din punct de vedere igienic și asigurați-vă o iluminare adecvată.Înainte de a utiliza stiloul injector, trebuie să curățați temeinic zona de piele pe care doriți să o tratați și să o dezinfecțați cu Alcoderm®.

1.

CURĂȚARE.

Îndepărtați machiajul și curățați părțile corpului care urmează să fie tratate cu multă apă și cu detergentul delicat pentru tratament. Luați o cantitate mică de Cleanser și amestecați-o cu puțină apă caldă.

Acum este creată o spumă blândă și de îngrijire intensivă. Întindeți această spumă pe partea corpului. Masează-l ușor și apoi clătește-l bine.

2.

PEELING ENZIMATICO.

Următorul pas este să eliminați celulele moarte ale pielii. În acest scop, peelingul de tratament enzimatic se aplică nediluat pe piele cu o perie de mască. Asigurați-vă că evitați zona gurii și a ochilor. Se lasa sa actioneze aproximativ 5-10 minute. Apoi îndepărtați cu multă apă și un burete fără a lăsa reziduuri. Uscați ușor și pulverizați zonele pielii nediluate cu dezinfectantul pentru piele Alcoderm® (timp de rezidență 30 de secunde).

Notă: De la o lungime a acului de 0,75 mm, poate fi recomandabil să utilizați ulterior o cremă anestezică (de exemplu, crema Emla). Vă rugăm să rețineți timpul de expunere al producătorului

3.

SER.

În general, aveți două opțiuni pentru a combina aplicarea de microneedling cu o terapie cu ingredient activ (ser). Fie lucrați într-un ser steril direct cu stiloul injector, fie utilizați un ser de îngrijire după tratament. Datorită purității farmaceutice și eficacității mai mari, recomandăm utilizarea unei fiole cu substanță activă sterilă. Luați serul cu seringă dozatoare fină furnizată. Pentru a face acest lucru, îndepărtați cu grijă capacul alb de pe fiolă. Perforați septul gri cu seringă de colectare și trageți seringă deschisă. Canula poate fi apoi îndepărtată cu ușurință pentru a răspândi în siguranță serul pe piele. Serul este foarte eficient si contine 10 ml.Ai nevoie doar de 2 pana la 3 ml pentru un tratament facial, mai mult pe corp in functie de marimea zonei de tratament.

4.

PENITĂ.

Decideți dacă doriți să efectuați tratamentul la rețea sau fără fir. Atașați accesoriul dorit pentru ac la dispozitiv și asigurați-vă că este sigur și nu este deteriorat. Puneți stiloul injector în funcțiune cu butonul ON/OFF. Lungimea dorită a acului poate fi setată numai când dispozitivul este pornit.

Acum strângeți zona de piele pe care doriți să o tratați cu două degete. Glisați stiloul pe piele în modelul dorit.

Asigurați-vă că ați înțepat fiecare zonă de piele de 5 până la 8 ori.

Notă importantă: În timpul tratamentului, un stilou injector nu trebuie niciodată răsturnat cu capul în jos (capul acului îndreptat în sus). Lichidul din capul acului poate pătrunde în compartimentul motor și poate cauza daune ireparabile (returnarea lichidului).

5.

HIDRATARE.

După tratament, canalele pielii tale sunt deschise timp de aproximativ 15 minute și sunt deosebit de receptive la măștile extrem de eficiente. Scoateți DER MIDA ®

Masca de hidratare a ambalajului. Dacă există, îndepărtați cele două folii de protecție și așezați masca pe partea tratată a corpului.

Acum relaxează-te timp de 10 până la 15 minute și lasă masca să-și facă treaba. Apoi îndepărtați masca și masați ușor în excesul de ser.

6.

REPARAȚIE.

Microneedling-ul pune o presiune asupra pielii. Tipurile de piele sensibilă și sensibilă folosesc acum balsamul de reparare post-tratament DERMIDA®. Acesta este un balsam de îngrijire intens hidratant și anti-iritant pentru utilizare imediată după aplicare. Balsamul Repair este ambalat igienic în plicuri individuale. Deschideți plicul și întindeți balsamul peste piele cu mișcări circulare. Lăsați-l să se absoarbă complet.

7.

PROTEJA.

Microneedlingul este perfect în orice moment al anului. Dacă partea tratată a corpului este expusă la soare, este necesară o protecție specială UV cu un factor de protecție solară ridicat. Pentru a face acest lucru, îndepărtați crema de protecție solară subțire și cu absorbție foarte rapidă DERMIDA® UV Protect

Cremă SPF 50+ și aplicați pe zona tratată.

al 8-lea .

ÎNGRIJIREA ZILNICĂ.

Evitați să vă atingeți pielea cu mâna în următoarele două ore. Evitați transpirația abundentă, băile de aburi și lumina directă a soarelui în ziua tratamentului. Nu purta machiaj.

Somnul este acum cea mai bună odihnă a pielii tale. Dacă este necesar, trebuie să vă schimbați fața de pernă în prealabil. În zilele care urmează între tratamente, vă puteți îmbunătăți și mai mult rezultatele tratamentului cu cremele speciale de îngrijire de zi de la DERMIDA® .

ATENȚIE!

Pericol de scurtcircuit. Există riscul deteriorării componentelor electronice dacă componentele stiloului injector (pen-ul) MEDICAL CONTROL sunt demontate și curățate în timp ce sunt încă conectate electric.

- Deconectați sursa de alimentare înainte de toate lucrările de curățare și întreținere.

ATENȚIE!

Daune cauzate de lichide. Dacă detergenții sau dezinfectanții intră în piesa de mână, unitatea de control sau sursa de alimentare, poate apărea un scurtcircuit.

De asemenea, poate coroda componentele electrice sau mecanice.

- Nu așezați niciodată piesa de mână, unitatea de comandă sau sursa de alimentare la curățare sau Scufundați dezinfectant.
- Nu așezați niciodată piesa de mână, unitatea de control sau sursa de alimentare într-o autoclavă sau într-o autoclavă Curățați baia cu ultrasunete.
- Compatibilitatea materialelor la alegerea agenților de curățare și dezinfectanți considera.

7.1 INSPECȚIA

Inspecțiile pot fi efectuate numai de dealeri autorizați. Vă recomandăm să predați NeedlingPen MEDICAL CONTROL unui dealer specializat la intervale regulate de 24 de luni pentru verificare conform specificațiilor producătorului. Puteți face acest lucru, de exemplu, cu dealerul dumneavoastră specializat sau la info@dermida.de a lua legătura.

7.2 MATERIALE CONTRACTUALE

Pentru a curăța stiloul injector (pen-ul) MEDICAL CONTROL, utilizați un agent de curățare pe bază de săpun ușor și un dezinfectant aprobat în țara respectivă. Pe baza următoarei compatibilități cu materialele, puteți evalua care agenți de curățare și dezinfectanți sunt cei mai potriviți.

Suprafețele NeedlingPen MEDICAL CONTROL sunt rezistente la:

- acizi ușori (adică acid boric 10%, acid acetic 10%, acid citric 10%)
- hidrocarburi alifatiche (de exemplu, pentan, hexan)
- Etanol
- majoritatea sărurilor anorganice și soluțiile lor apoase (de exemplu, clorură de sodiu, clorură de calciu, sulfat de magneziu)

Suprafețele NeedlingPen MEDICAL CONTROL nu sunt rezistente la:

- acizi tari (de exemplu, acid clorhidric 20%, acid sulfuric 50%, acid azotic 15%)
- acizi oxidanți (de exemplu, acizi peracetici)
- soluții alcaline (adică sodă caustică, amoniac și toți compușii cu pH > 7)
- hidrocarburi aromatice/halogenate (de exemplu, fenol, cloroform)
- Acetonă și benzină

7.3 DEZINFECTAREA SUPRAFEȚELOR

Înainte și după fiecare utilizare:

- Cablul piesei de mână, piesa de mână și restul piesei de mână ale infectat, așa cum este descris în secțiunea „7.5 Curățarea și dezinfectarea dispozitivului”.

7.4 CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR

Curățare exterioară:

- NeedlingPen MEDICAL CONTROL și accesoriile sale cu unul cârpă moale înmuiată într-o soluție de detergent/dezinfectant.

7.5 CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA APARATULUI

ATENȚIE!

Daune cauzate de lichide. Dacă agenții de curățare sau dezinfectanții pătrund în piesa de mână, unitatea de control sau sursa de alimentare, poate apărea un scurtcircuit.

De asemenea, poate coroda componentele electrice și mecanice.

- Nu așezați niciodată piesa de mână, unitatea de comandă sau sursa de alimentare la curățare sau Scufundați dezinfectant.
- Nu așezați niciodată piesa de mână, unitatea de control sau sursa de alimentare într-o autoclavă sau într-o autoclavă Curățați baia cu ultrasunete.
- Compatibilitatea materialelor la alegerea agenților de curățare și dezinfectanți verifica.

8. CONDIȚII DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE.

8.1 PIESA DE MÂNĂ, ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE

ATEN IE!

Daune din cădere. Dacă piesa de mână cade, aceasta poate fi deteriorată.

- Așezați întotdeauna piesa de mână pe o suprafață plană și stabilă, astfel încât să nu se afle poate cădea.
- Puneți piesa de mână în suport după fiecare utilizare pentru a o păstra în siguranță.
- Dacă piesa de mână este căzută, inspectați vizual componentele.
- Duce i unitatea de control sau piesa de mână la un dealer autorizat dacă Componentele sunt vizibil ocupate sau nu mai funcționează normal.
- NeedlingPen MEDICAL CONTROL și accesoriile sale numai în ambalajul original transport.

Depozitați întotdeauna NeedlingPen MEDICAL CONTROL și accesoriile acestuia în următoarele condiții:

dispozitiv	CONTROL MEDICAL stilou stilou
temperatura ambientală	-10°C până la +40°C
Umiditate relativă	10% până la 90%
presiunea aerului	540 hPa până la 1070 hPa

8.2 MODULE DE AC

Depozitați întotdeauna modulele de ac sterile în următoarele condiții:

dispozitiv	CONTROL MEDICAL stilou stilou
temperatura ambientală	-15°C până la +25°C
Umiditate relativă	30% până la 65%

9. ANTRENARE.

9.1 MICRONEEDLING MEDICAL

Este responsabilitatea companiei furnizoare (sau oricui în numele lor) să ofere instruire adecvată pentru a învăța ceea ce este descris în acest manual și pentru a se asigura că tratamentul este efectuat corect. Cu toate acestea, este foarte recomandat să verificați în prealabil cu autoritățile locale de sănătate orice obligație de a urma cursurile de formare recomandate sau obligatorii conform reglementărilor diferitelor țări.

9.2 MICRODERMABRAZIUNE ESTETICĂ

Este responsabilitatea companiei furnizoare (sau oricui în numele lor) să ofere instruire adecvată pentru a învăța ceea ce este descris în acest manual și pentru a se asigura că tratamentul este efectuat corect. În acest sens va avea loc un eveniment de instruire cu personal înalt calificat.

10. OBLIGAȚIA CIVILĂ.

RĂSPUNDERE

YOYU BRANDS GmbH nu este responsabil pentru siguranță, fiabilitate și Performanța CONTROLULUI MEDICAL NeedlingPen dacă:

- Fără instruire din partea producătorului sau a unui dealer autorizat A fost rezolvat.
- sistemul electric al încăperii în care NeedlingPen MEDICAL CONTROL este instalat nu respectă legile aplicabile, reglementările naționale de siguranță și standardele europene.
- aparatul nu este conform celor cuprinse în acest manual Sunt folosite instrucțiuni, recomandări și avertismente.

YOYU BRANDS GmbH respinge orice răspundere pentru vătămări corporale sau daune materiale cauzate de manipularea neautorizată a dispozitivului, întreținerea lipsă sau insuficientă și nerespectarea reglementărilor cuprinse în acest manual.

11. GARANȚIE.

GARANȚIE DE DOUAȘE LUNI



Aparatul este garantat împotriva defectelor de materiale și de montaj din fabrică pe o perioadă de douăsprezece luni.

Nu sunt acoperite de garanție piesele supuse uzurii din cauza utilizării normale și piesele care s-au defectat din cauza utilizării greșite sau a unei întrețineri defectuoase.

12. CONDIȚII NEACOPERITE DE GARANȚIE.

- Reparații rezultate în urma dezastrelor naturale, șoc mecanic, defecțiune a sistemului electric, neglijență, utilizare greșită sau abuz al unității, service sau reparații conform

Utilizarea materialelor și/sau de către persoane neautorizate de YOYU BRANDS GmbH.

- Orice condiție de utilizare neprevăzută de producător.
- Reparațiile se efectuează în fabrica noastră sau în ateliere specializate. NeedlingPen MEDICAL CONTROL trebuie expediat în prealabil să fie aprobat de YOYU BRANDS GmbH. Costurile de transport clientul trebuie să suporte.
- YOYU BRANDS GmbH nu este responsabil pentru nicio întrerupere sau eșec a serviciului, care se datorează unor circumstanțe care nu sunt reprezentat.
- Sub nicio formă clientul nu poate cere despăgubiri pentru daunele cauzate de suferit defectarea aparatului.
- Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați kontakt@prpmed.de

ATENȚIE!

Dispozitivul poate funcționa defectuos sau se poate opri dacă nu este întreținut în mod regulat de YOYU GmbH sau de un centru de service autorizat. Vă rugăm să contactați un centru de service aproximativ la fiecare 24 de luni după utilizare și uzura componentelor interne.

13. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ELIMINAREA DISPOZITIVULUI.



NeedlingPen MEDICAL CONTROL pe care l-ați achiziționat necesită utilizarea de materiale și substanțe speciale la fabricarea sa. De asemenea, poate conține substanțe periculoase care, dacă sunt eliberate necorespunzător în mediu, pot avea un impact asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a preveni eliberarea de substanțe periculoase în mediu și pentru a promova conservarea resurselor naturale, producătorul trebuie să faciliteze reutilizarea, recuperarea și reciclarea materialelor conținute în dispozitiv atunci când utilizatorul intenționează să arunce dispozitivul. Autoritățile publice iau măsuri corespunzătoare pentru ca utilizatorii, distribuitorii și producătorii să contribuie la colectarea DEEE și să îi oblige să le refolosească sau să le recicleze. Când aruncați dispozitivul, vă rugăm să rețineți că se aplică reglementări legale naționale speciale:

- Nu aruncați aparatul ca deșeuri municipale, ci colectați-l separat. Pentru a face acest lucru, contactați o companie specializată în eliminarea dispozitivelor electrice/electronice vechi, cum ar fi NeedlingPen MEDICAL CONTROL, sau autoritățile locale de deșeuri.
- Luați în considerare posibilele efecte dăunătoare asupra mediu și sănătatea umană care pot fi în substanțe periculoase prezente în dispozitivele electrice și electronice sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor sau a pieselor acestora sunt datorate. Dispozitivul la care se referă acest manual constă din piese mecanice din metal și plastic, precum și din componente electrice. Producătorul este alături de utilizatori disponibil la cerere pentru a furniza orice informații despre dispozitive substanțele periculoase conținute și recuperarea și reutilizarea acestora sau despre posibilitățile de reutilizare a vechiului dispozitiv.

prpmed.de

prpmed.de Funkner e. K
Kurstrasse 7,
63667 Bad Salzhausen

kontakt@prpmed.de
<https://prpmed.de>