


Die BAP Technik (BAP = Bio Ästhetische Punkte)

Diese Technik ermöglicht mit nur 5 kleinen Injektionen je Gesichtshälfte mit feinsten Kanüle (29G TW) das Fluten des gesamten Gesichtes mit PROFHILO®.

Die dosierte Menge an den besonders aufnahmefähigen BAP-Punkten erlaubt die flächige Diffusion von PROFHILO® in der Subkutis und bewirkt ein natürliches und anhaltend frisches Aussehen. PROFHILO® ist kombinierbar mit allen gängigen ästhetischen Verfahren (Filler und Botox).


Bestimmung BAP

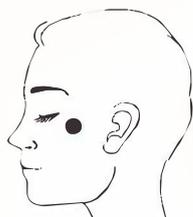

- 1 Jochbein Vorsprung**
Mindestabstand von 2 cm zum distalen Augenwinkel




- 2 Nasale Basis**
Am Schnittpunkt einer senkrechten Linie von der Pupille und einer waagrechten Linie vom Nasenflügel zum Tragus

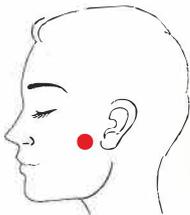

- 3 Tragus**
Mindestens 1 cm vor dem Tragus



- 4 Kinn**
1,5 cm entfernt vom Schnittpunkt einer vertikalen Linie von der Kinnmitte und einer waagrechten Linie, welche die vertikale Linie im oberen Drittel schneidet

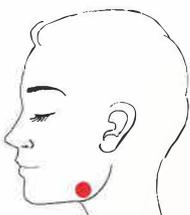

- 5 Kieferwinkel**
1 cm oberhalb des Kieferwinkels

5 BAP Injektionspunkte pro Gesichtshälfte

je Bolus 0,2 ml in die Subkutis

Nur 2 Behandlungen

mit einem Monat Abstand reichen in der Regel aus.

Je nach Beschaffenheit der Haut folgt eine dritte Anwendung nach zwei Monaten.

Für anhaltende Ergebnisse werden 2 Behandlungszyklen pro Jahr empfohlen.

Bitte beachten!

Die abgebildeten Angaben zu den Bio Ästhetischen Punkten (BAP) müssen an die individuelle Morphologie des jeweiligen Patienten angepasst werden.